

Μαζί χτίζουμε
την ασφάλεια
της υγείας

clinell®



**UNIVERSAL
WIPES**



**PERACETIC ACID
WIPES**

Αφίσες - γενική καθαριότητα

Πρωτόκολλα Καθαριότητας

Επιλογή Απολυμαντικού

Φυλλάδια

Οδηγίες Καθαριότητας

Πίνακες Αποτελεσματικότητας

Μαζί χτίζουμε
την ασφάλεια
της υγείας

clinell®



UNIVERSAL
WIPES



PERACETIC ACID
WIPES



Selecting a disinfectant wipe

Ηγετικές προσωπικότητες στην Πρόληψη & τον Έλεγχο των Λοιμώξεων από το Royal College of Nursing¹, συμπεριλαμβανομένου του Peter Hoffman, συζητούν γύρω από τα κριτήρια επιλογής των προϊόντων απολύμανσης επιφανειών.

Ως πρακτική βασισμένη σε στοιχεία, τα διαλύματα IPC, όπως τα προεμπτισμένα απολυμαντικά μαντηλάκια, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Η αποτυχία κάλυψης των αναγκών απολύμανσης του περιβάλλοντα χώρου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος και κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.

Για κάθε 100 νοσηλευόμενους ασθενείς, οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI) θα επηρεάσουν:

7/100 ασθενείς - χώρες υψηλού εισοδήματος
15/100 ασθενείς – χώρες μέσου & χαμηλού εισοδήματος

1/10 προσβεβλημένους ασθενείς θα καταλήξουν από HAI.

World Health Organization 2022. WHO launches first ever global report on infection prevention and control. [online] [Accessed 6 September 2022]

Παράγοντες επιλογής ενός απολυμαντικού πανακίου		Ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε
Αποτελεσματική σύνθεση	Τόσο η υγρή φόρμουλα όσο και το υλικό του υποστρώματος επηρεάζουν την ικανότητά του πανακίου να σκοτώνει μικροοργανισμούς. Τα κακώς κατασκευασμένα πανάκια μπορούν να αντιμετωπίσουν παρόμοιο πρόβλημα με το στεγνό πανί και τα απολυμαντικά διαλύματα - προσρόφηση. Αυτή είναι μια χημική αλληλεπίδραση μεταξύ της υγρής φόρμουλας και του υποστρώματος, η οποία παγιδεύει τα ενεργά μόρια και μειώνει την αποτελεσματικότητα των πανακίων. Επομένως, κατά την ανάλυση της αποτελεσματικότητας ενός προεμπτισμένου πανακίου, θα πρέπει να ελέγχεται το υγρό που εξάγεται από το πανάκι. Αυτή η μεθοδολογία δίνει μια ακριβή ένδειξη της απόδοσης του πανακίου.	"Ο έλεγχος αποτελεσματικότητας ανέλυσε το υγρό που εξάγεται από το πανάκι;" "Είναι σαφές ότι το υγρό που εξάγεται από το πανάκι έχει δοκιμαστεί;"
	Οι τυποποιημένες δοκιμές αποτελεσματικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη γενικευμένων ισχυρισμών όπως «Σκοτώνει το 99,99% των βακτηρίων», ωστόσο, αυτές οι δοκιμές δεν αναλύουν την αποτελεσματικότητα έναντι όλων των βακτηρίων. Στην πραγματικότητα, οι τυποποιημένες μεθοδολογίες μπορούν να δοκιμάσουν μόλις 3 είδη για να τεκμηριώσουν έναν ευρύ γενικό ισχυρισμό. Διαφορετικοί μικροοργανισμοί μπορεί να παρουσιάσουν συγκεκριμένους χρόνους επαφής και μείωση του log, επομένως οι λεπτομερείς δοκιμές αποτελεσματικότητας παρέχουν ακριβή ένδειξη της απόδοσης έναντι συγκεκριμένων κλινικά σχετικών μικροοργανισμών.	"Ποιοι κλινικά σχετικοί οργανισμοί έχουν δοκιμαστεί;"
Ρεαλιστικοί χρόνοι επαφής	Η ικανότητα απολύμανσης ενός υγρού απολυμαντικού, όπως αυτά που βρίσκονται στα υγρά πανάκια, εξαρτάται από τον χρόνο επαφής και τις συνθήκες δοκιμής. • Οι χρόνοι επαφής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο που θα περιμένατε μια επιφάνεια να παραμείνει υγρή μετά το σκούπισμα - Μια επιφάνεια πρέπει να παραμένει υγρή προκειμένου να επιτευχθεί συγκεκριμένη μείωση του log των έμβιων μικροοργανισμών. Οι μη ρεαλιστικοί χρόνοι επαφής μπορεί να είναι παραπλανητικοί - μερικοί φτάνουν τα 60 λεπτά. Ο κίνδυνος είναι ότι εάν η επιφάνεια στεγνώσει πριν επιτευχθεί ο χρόνος επαφής, τα παθογόνα θα επιβιώσουν. • Οι βρώμικες συνθήκες παρέχουν καλύτερη ένδειξη της πραγματικής απόδοσης - Η οργανική ύλη είναι διαδεδομένη σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και μπορεί να αναστείλει την απολυμαντική δράση. Επομένως, οι δοκιμές αποτελεσματικότητας που διεξάγονται σε καθαρές συνθήκες θα παραπλανήσουν για την πραγματική απόδοση ενός απολυμαντικού. Οι δοκιμές που διεξάγονται παρουσία οργανικής ύλης ή «βρώμικων συνθηκών» δίνουν μια ακριβέστερη αντανάκλαση της αποτελεσματικότητας σε πραγματικές συνθήκες.	"Ποιοι χρόνοι επαφής χρειάζονται για συγκεκριμένους μικροοργανισμούς; Είναι αυτοί ρεαλιστικοί;" "Επιτεύχθηκαν κάτω από βρώμικες συνθήκες;"

1. Royal College of Nursing. Wipe it out: the selection and use of disinfectant wipes. 2011



Συμβατότητα επιφανείας

Ορισμένες επιφάνειες απαιτούν συχνή απολύμανση και ενώ οι ιατρικές συσκευές και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ζημιές, τα ασύμβατα απολυμαντικά μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες, δαπανηρές ζημιές.

Ορισμένα απολυμαντικά χρησιμοποιούν σκληρές χημικές ουσίες, όπως χλώριο, αλκοόλη και παράγωγα αμίνης για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους ή να σταθεροποιήσουν τη σύνθεσή τους. Αυτά τα συστατικά μπορούν να επηρεάσουν τη συμβατότητα του απολυμαντικού και να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες.

Οι δοκιμές συμβατότητας μπορούν να σιγουρέψουν και να τεκμηριώσουν την ασφάλεια για χρήση σε κοινά υλικά που βρίσκονται στην υγειονομική περίθαλψη (μέταλλα, πλαστικά και καουτσούκ).

Η αποτυχία στην κάλυψη των αναγκών συμβατότητας μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, οι οποίες να αποτελέσουν εστία για παθογόνα που μπορούν να ξεφύγουν από την απολύμανση.

"Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα συμβατότητας; Με ποια υλικά;"

"Έχει δοκιμαστεί το προϊόν με κατασκευαστές ιατρικών συσκευών;"

Δημοσιευμένα αποδεικτικά στοιχεία

Ενώ οι εργαστηριακές δοκιμές μπορούν να σχεδιαστούν στρατηγικά για να μιμούνται πραγματικούς παράγοντες in vitro, υπάρχουν περιορισμοί στη διορατικότητά του. Ευτυχώς, αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή δημοσιευμένης βιβλιογραφίας μπορούν να τεκμηριώσουν περαιτέρω την απόδοση ενός προϊόντος in situ.

Τα απολυμαντικά μαντηλάκια μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη πέρα από την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα και τη συμβατότητα ενώ οι κλινικές μελέτες μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τα οφέλη ενός προϊόντος, όπως:

- Επιπτώσεις στα ποσοστά μόλυνσης
- Εξοικονόμηση κόστους
- Εξοικονόμηση χρόνου
- Βελτίωση στη συμμόρφωση
- Συγκρίσεις πρωτοκόλλων

"Ποια στοιχεία υπάρχουν για να υποστηρίξουν την απόδοση του προϊόντος στον πραγματικό κόσμο;"

Σταθερή ποιότητα

Εάν χρησιμοποιούνται για την απολύμανση επιφανειών και καθαρισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τα απολυμαντικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της γνησιότητας κατά τη χρήση.

Ο έλεγχος του CE Mark είναι ένας γρήγορος τρόπος για να προσδιορίσετε εάν ένα προϊόν πληροί το απαιτούμενο πρότυπο προς πώληση. Αυτή η ταξινόμηση προσδίδει αξιοπιστία στην ποιότητα του προϊόντος, καθώς δείχνει ότι ο κατασκευαστής έχει εκπληρώσει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων (GSPR) για να διαθέσει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην αγορά της ΕΕ.

Οι κατασκευαστές απολυμαντικών πανακίων θα πρέπει να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα πρωτόκολλα ποιότητας για την εξάλειψη του κινδύνου μόλυνσης κατά την παραγωγή: τακτικές μικροβιολογικές δοκιμές παρτίδας, διήθηση σκευάσματος και έλεγχος προμηθευτών πρώτων υλών.

"Υπάρχει CE Mark;"

"Ποιοι έλεγχοι ποιότητας και υγιεινής εφαρμόζονται;"

Εφαρμογή και εκπαίδευση

Η υποστήριξη της εφαρμογής και της συνεχούς χρήσης επιλεγμένων πανακίων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως η διά ζώσης κατάρτιση και η διαδικτυακή μάθηση, μπορούν να συμβάλουν στην ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τα τοπικά πρωτόκολλα και θα πρέπει να προσφέρονται στους εργαζομένους και το προσωπικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τα εργαλεία ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου και την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή οπτικών ελέγχων, μικροβιολογικού επιχρίσματος, συσκευών ATP ή εύχρηστων κιτ φθορισμού.

Θα πρέπει επίσης να διατίθενται συσκευές διάθεσης για την προώθηση της συμμόρφωσης και των βέλτιστων πρακτικών. Επιτοίχιες βάσεις τοποθετούν τα πανάκια στο σημείο χρήσης και λειτουργούν ως οπτικό βοήθημα για την ενθάρρυνση της απολύμανσης. Οι βάσεις κρατούν τα πανάκια τοποθετημένα σε όρθια θέση για να επιτρέπουν την ίση κατανομή του απολυμαντικού υγρού σε κάθε πανάκι.

"Τι εκπαίδευση και υποστήριξη είναι διαθέσιμη;"

"Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής;"

"Παρέχονται δωρεάν συσκευές διάθεσης;"



Μαζί χτίζουμε
την ασφάλεια
της υγείας

clinell®



UNIVERSAL
WIPES



PERACETIC ACID
WIPES



clinell®

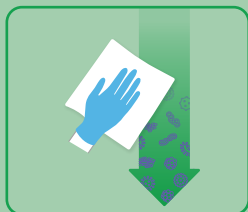
Καθαριότητα

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

Πώς



Τοποθετήστε τη συσκευασία κοντά στα σημεία εφαρμογής



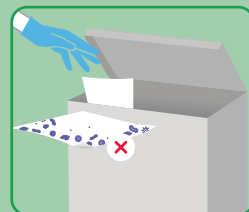
Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια



Καθαρίστε σε σχήμα S χωρίς να περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές



Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο



Χρησιμοποιείτε διαφορετικό πανάκι σε κάθε νέα επιφάνεια

Που



Καθίσματα



Μηχανήματα



Όργανα



Διακόπτες



Λαβές

Πότε



Μετά από κάθε χρήση



Τακτικά τα σημεία συχνής επαφής

Με τα **Clinell®** μπορείτε να διατηρήσετε το περιβάλλον πάντα **καθαρό & ασφαλές**



Χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά με προσοχή.

Τα Clinell® είναι δραστικά κατά του ιού της γρίπης, του νοροϊού και του ιού SARS-CoV-2 σε 30". Εφαρμόστε καθημερινά σύμφωνα με τις βασικές αρχές καθαρισμού. Πριν τη χρήση να διαβαζέτε πάντα την προϊόντική ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης.

CE0473

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIa.

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Λεωφόρος Μαραθώνος 112 Τ: 2108049747
15344 Γέρακας F: 2108049377
info@biokon.gr
www.biokon.gr

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD



biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

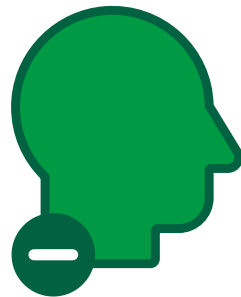


5 moments for environmental decontamination



1

Visibly
dirty



2

After patient
discharge



3

Before
procedure



4

After
procedure



5

Routine
high-touch
points

JBN230101

GAMA Healthcare Ltd.,
The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com www.gamahealthcare.com

gama
healthcare



biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

#clinellready

Remember...

Wipe in an 'S' shape



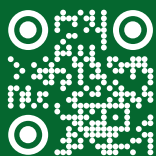
We're ready for winter

Wiping in an S-shape on a surface stops you from spreading dirt and microorganisms onto the part of the surface you have already cleaned. Following good cleaning and disinfection practices whilst using our unique formulations can help keep your hospital environments and equipment clean and disinfected effectively.

Find out more at www.clinellready.com



JBN210887



GAMA Healthcare Ltd.,
The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com

gama
healthcare



biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

Μαζί χτίζουμε

την ασφάλεια

της υγείας

clinell®



**UNIVERSAL
WIPES**



**PERACETIC ACID
WIPES**

Πρωτόκολλα Καθαριότητας

Mattress

Bed Frame

Cot Sides or Bed Rails

Hospital Chair

Dressing Trolley

Pillow

Patient Examination Couch

Operating Table

Bedside Cabinet or Locker

Bedside Table

Blood Glucose Machine Kit

Blood Pressure Cuff

Electronic Thermometer

Patient Call Bell

Desk Telephone

Dialysis Machine

Drip Stand

Infusion Pump

Ventilator

ECG Machine and Trolley



The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Infusion Pump



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



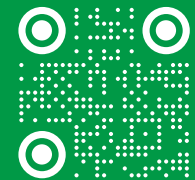
Cleaning Frequency

In between infusions and before storage.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220134



Cleaning Protocol Infusion Pump



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

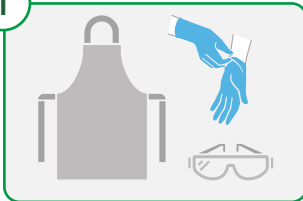
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

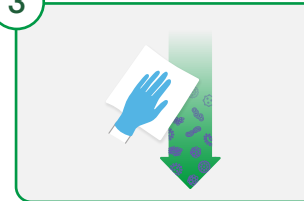
Open each wipe and cover the flatter surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

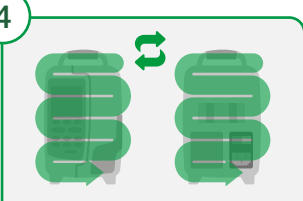
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

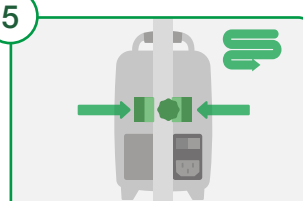
- 

1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

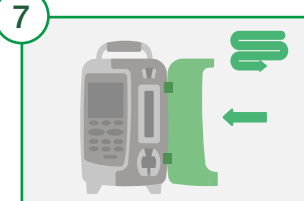
2 Disconnect and remove all consumables from the infusion pump.
- 

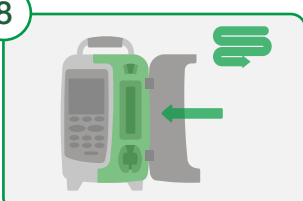
3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

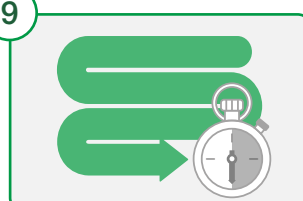
4 2-4 Depending on the infusion pump, you will need 2-4 wipes. Replace wipes when they dry out or become visibly soiled.
- 

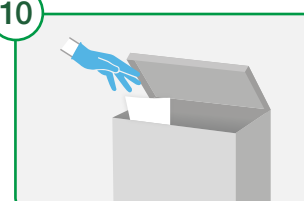
4 Clean the front, back, top and sides of the pump, including the door handle.
- 

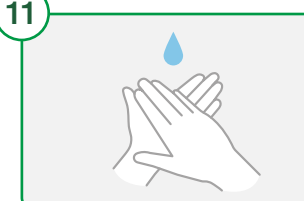
5 Wipe the bracket connecting the drip stand to the pump.
- 

6 Make sure to replace your wipe if it dries out or becomes contaminated.
- 

7 With a new wipe, clean the inside of the door, starting top to bottom, including all crevices.
- 

8 Following the manufacturer's instructions, wipe around all ports and connectors.
- 

9 Leave infusion pump to air dry, ensuring sufficient contact time with disinfectant.
- 

10 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

11 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

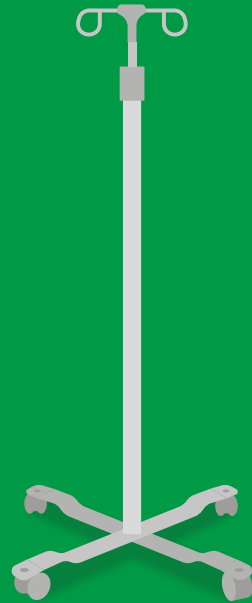


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Drip Stand



Responsibility

The person responsible for cleaning a drip stand are those who have removed it from a patient's bedside prior to storage or to be used by another patient. This also applies to those responsible for regular cleaning whilst a patient is using the drip stand. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.

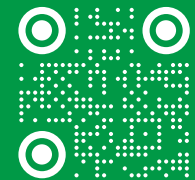


Cleaning Frequency

Between patient use, if it becomes soiled or weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220089



Cleaning Protocol Drip Stand



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

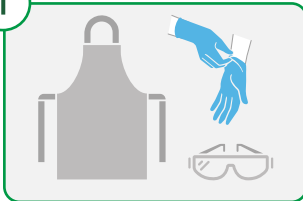
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Unfold each wipe fully before using. When working on flat surfaces, wipe in an 'S' shaped pattern to ensure all the surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

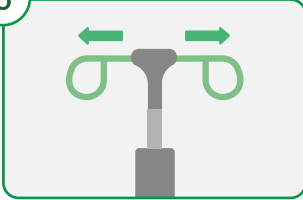
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

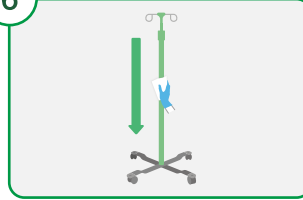
- 

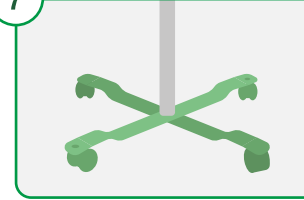
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

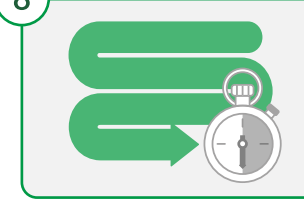
2 Remove anything attached to the drip stand.
- 

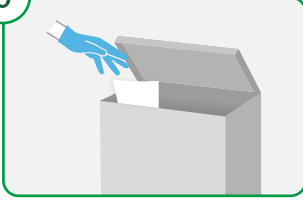
3 Always wipe from clean to dirty.
- 

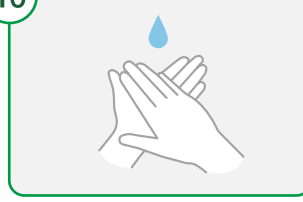
4 All surfaces should be covered with approximately 1-2 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

5 Start at the top of the drip stand and clean all all surfaces.
- 

6 Wipe down the shaft of the stand.
- 

7 Using a new wipe, clean the stand feet, including any wheels and brakes. Wipe all exposed surfaces, ledges and brackets.
- 

8 Leave drip stand to air dry, ensuring sufficient contact time with disinfectant.
- 

9 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

10 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

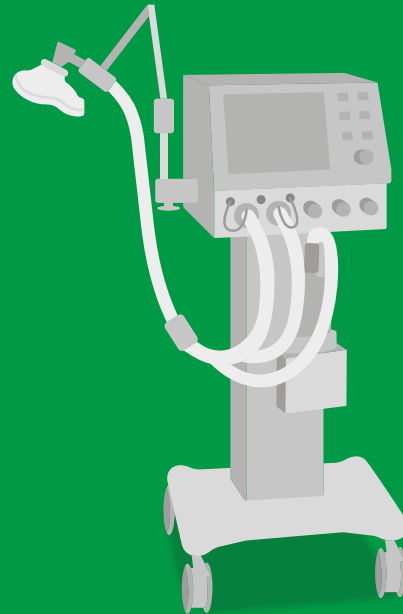


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Ventilator



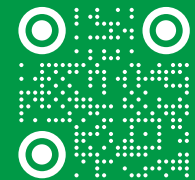
Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



Cleaning Frequency

In between patient use, if the device is visibly soiled or weekly.



Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.



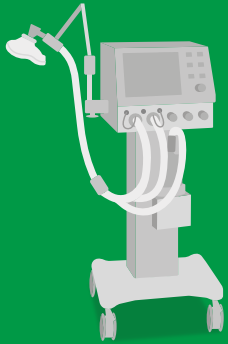
GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

JBN220231



Cleaning Protocol Ventilator



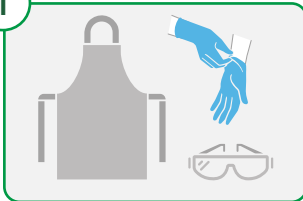
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

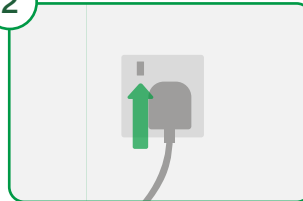
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

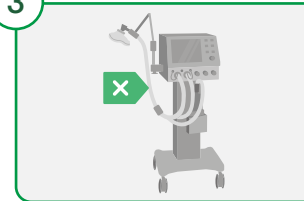
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

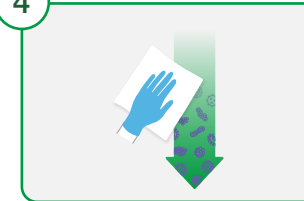
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

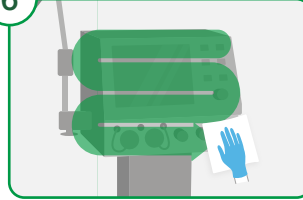
- 

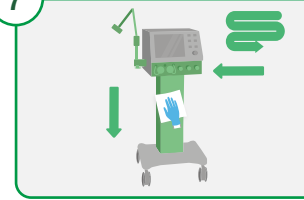
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

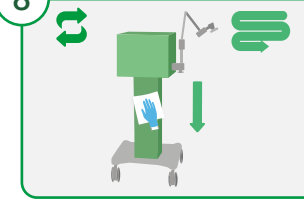
2 Ensure the ventilator is switched off if it is safe and appropriate to do so.
- 

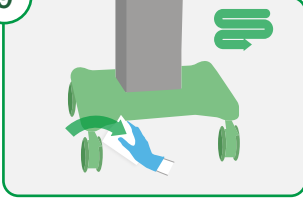
3 Remove all consumables from the device (if not in use).
- 

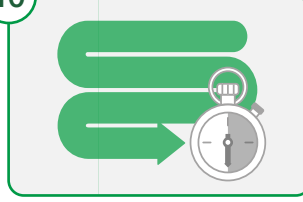
4 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

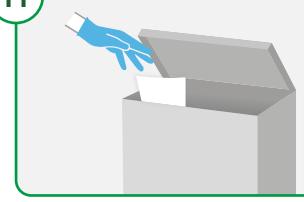
5 Depending on the ventilator, you will need approximately 3-5 wipes. Replace wipes when they dry out or become visibly soiled.
- 

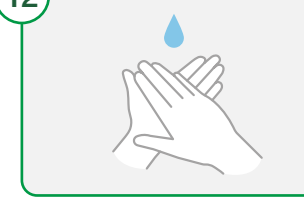
6 Start at the top of the device and work downwards, wiping in an 'S' shaped pattern down the front surface, including the screen.
- 

7 Wipe any exposed surfaces, switches, knobs, ledges and brackets.
- 

8 Using a new wipe, clean the back and sides of the ventilator.
- 

9 Clean the stand, wheels and brakes with a new wipe.
- 

10 Leave the device to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

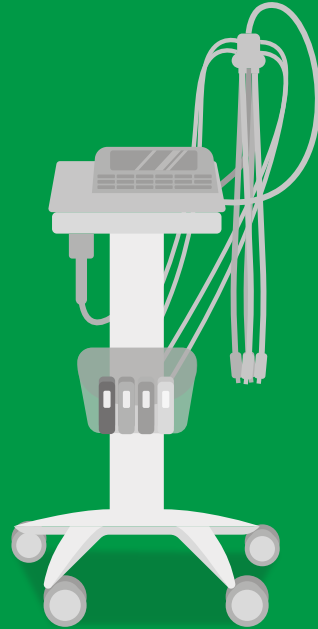


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol ECG Machine and Trolley



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



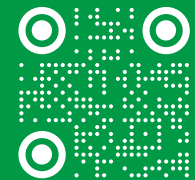
Cleaning Frequency

In between patient use, if the device is visibly soiled or weekly.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

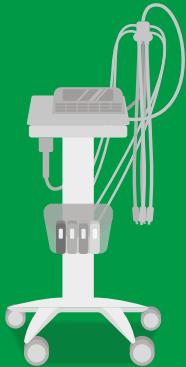


Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220230



Cleaning Protocol ECG Machine and Trolley



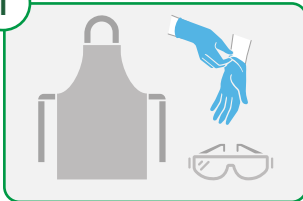
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

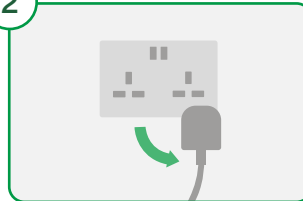
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

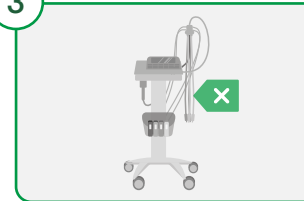
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

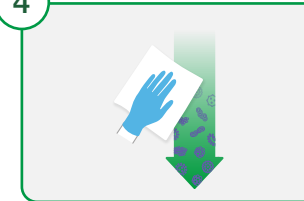
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

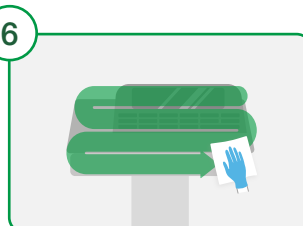
- 

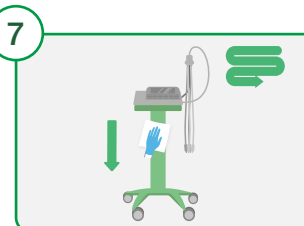
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

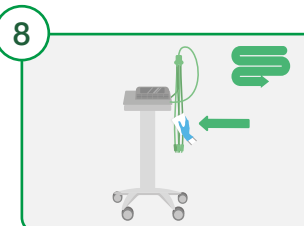
2 Disconnect the ECG machine from any electrical supply.
- 

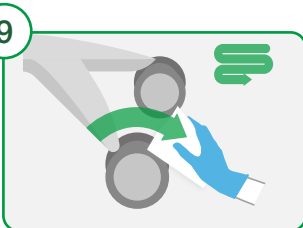
3 Remove any consumables from the machine and trolley.
- 

4 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

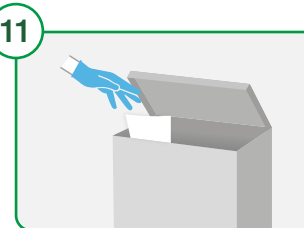
5 Depending on the ECG machine and trolley, you will need 3-5 wipes. Replace wipes when they dry out or become visibly soiled.
- 

6 Starting at the top surface of the machine, wipe in an 'S' shaped pattern, including the screen.
- 

7 Wipe over all exposed surfaces, ledges and brackets.
- 

8 Using a new wipe, clean all leads, cables and the cable arm.
- 

9 Clean the trolley, any baskets and the wheels and brakes with a new wipe.
- 

10 Leave the device to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

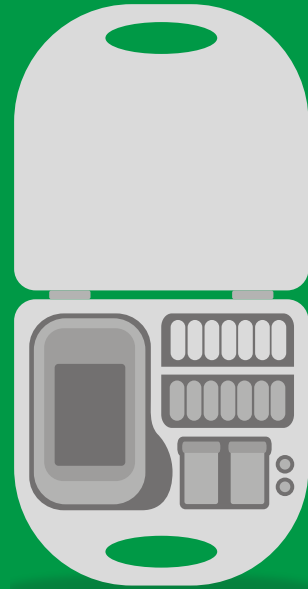


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Blood Glucose Machine Kit



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



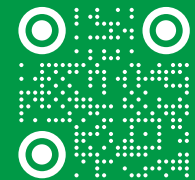
Cleaning Frequency

Between patients, weekly or if it becomes visibly soiled.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



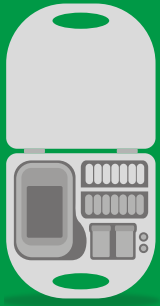
Please scan the QR code to find out more information about our Cliniell Universal Wipes.

JBN220194



clinell®

Cleaning Protocol Blood Glucose Machine Kit



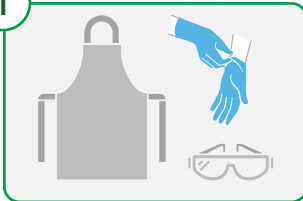
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

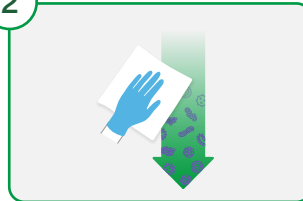
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

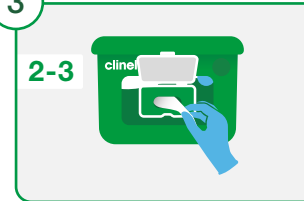
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

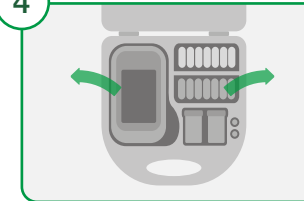
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

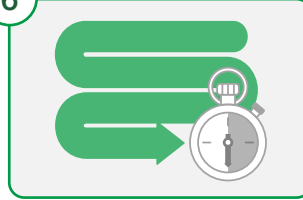
- 

Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

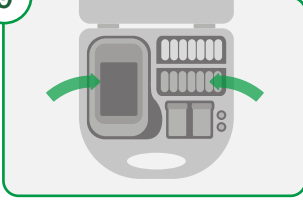
Depending on the blood glucose kit, you will need approximately 2-3 wipes.
- 

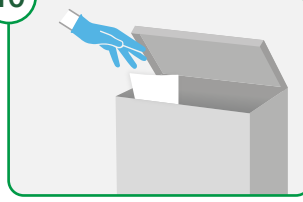
Empty the contents of the box or kit.
- 

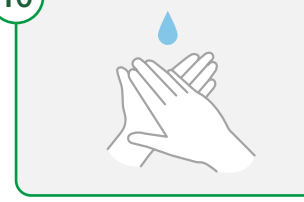
Clean the outer surfaces of the box, followed by the inner surfaces. Ensure that all segments have been wiped.
- 

Leave the blood glucose kit to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

Remember to replace the wipe should it dry out or become visibly soiled.
- 

With a new wipe, clean all reusable components and allow them to air dry.
- 

Return or refill any consumables for the kit.
- 

Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.



The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

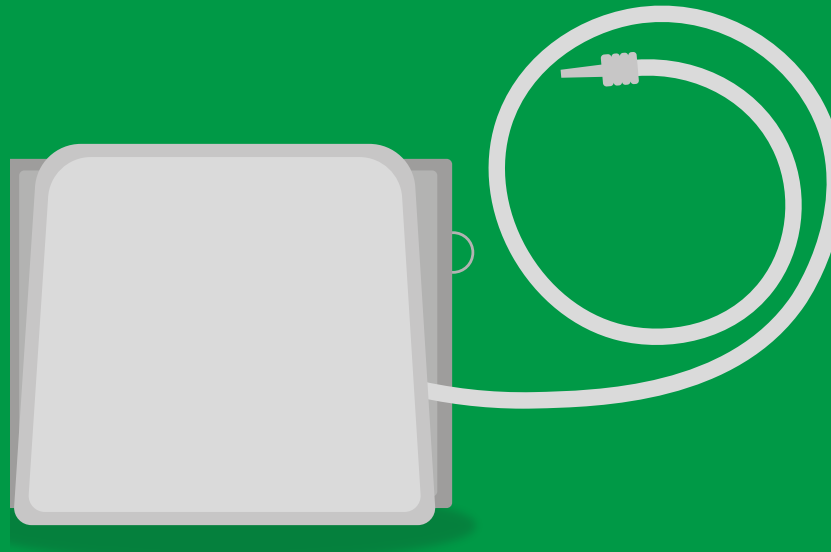


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Blood Pressure Cuff



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



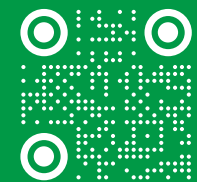
Cleaning Frequency

After patient use.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

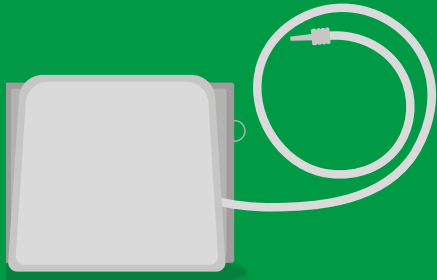


Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220133



Cleaning Protocol Blood Pressure Cuff



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

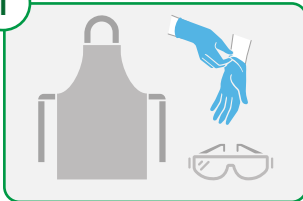
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

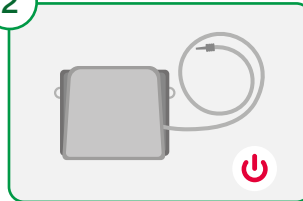
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Open each wipe and cover the flatter surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

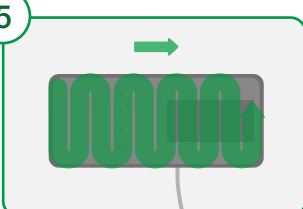
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

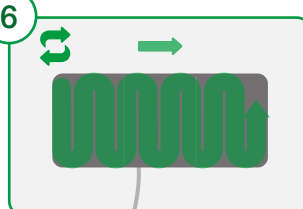
- 

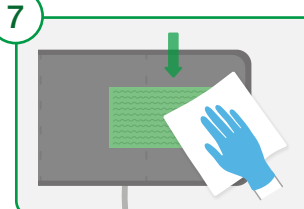
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

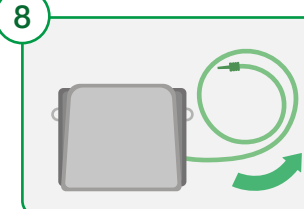
2 Switch off any power that might be connected to the machine.
- 

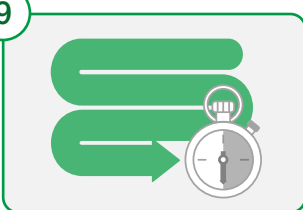
3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

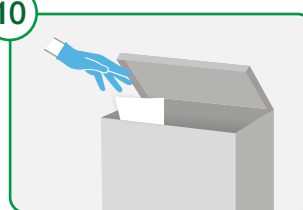
4 Cleaning all surfaces should require approximately 2 wipes. Ensure you replace wipes that dry out or become soiled.
- 

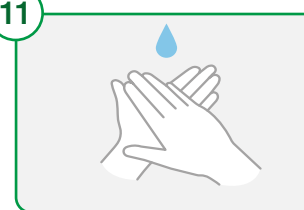
5 Open the cuff flat, and from one of the corners, wipe along the cuff in an 'S' shaped pattern.
- 

6 Turn the cuff over and repeat.
- 

7 The Velcro on the cuff needs to be wiped thoroughly and be wet enough to penetrate the entire layer of the Velcro as it is challenging to effectively clean.
- 

8 Using a new wipe, clean any connection hoses, including where they attach to the machine.
- 

9 Leave the blood pressure cuff to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

10 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

11 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

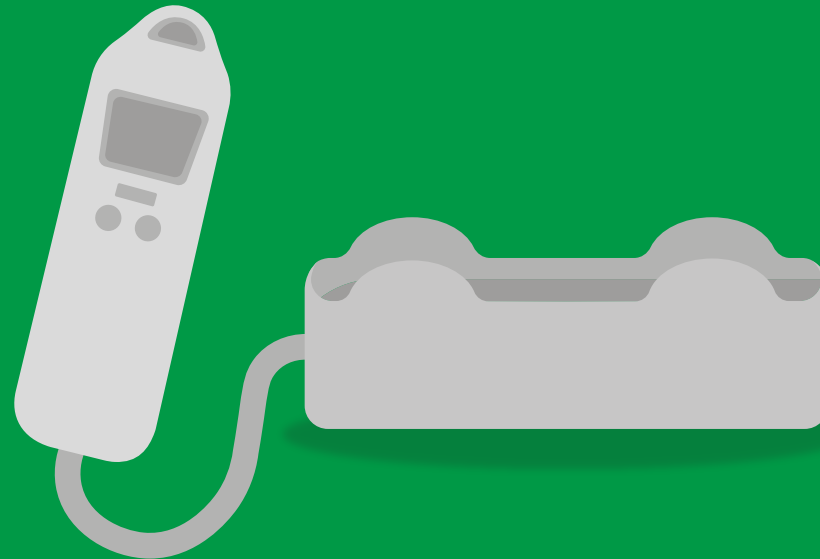


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Electronic Thermometer



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



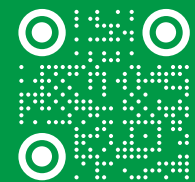
Cleaning Frequency

After use and before putting into storage.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

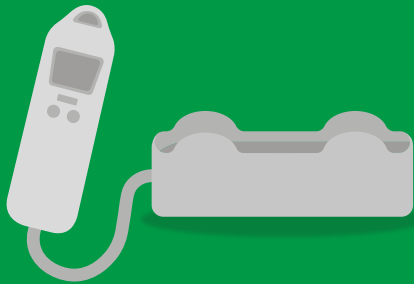


Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220181



Cleaning Protocol Electronic Thermometer



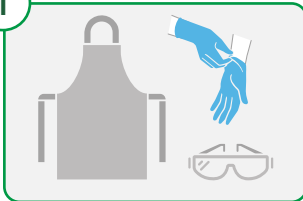
This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage. Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

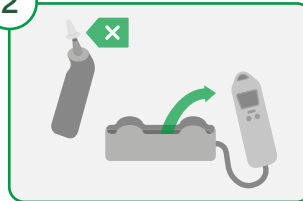
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

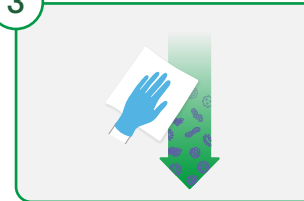
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

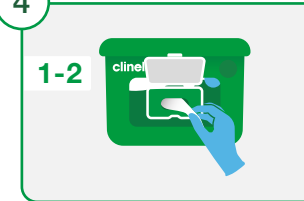
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

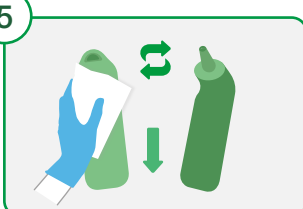
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

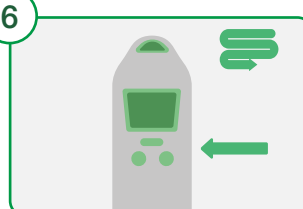
- 

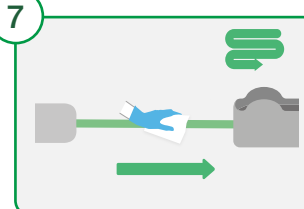
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

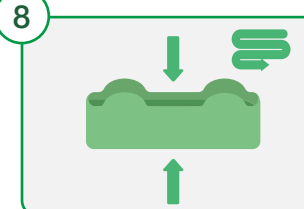
2 Remove all consumables from the thermometer.
- 

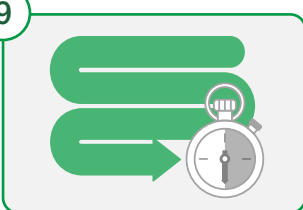
3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

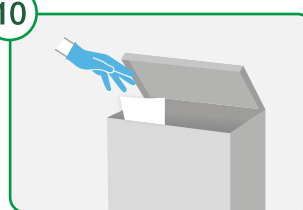
4 Depending on the size of the thermometer, you will need 1-2 wipes. Replace wipes when they dry out or become visibly soiled.
- 

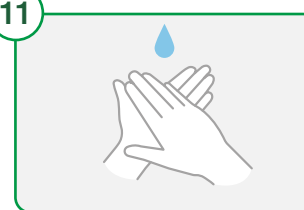
5 Use a wipe to clean one side of the thermometer then the other side.
- 

6 Clean all screens, buttons and ridges.
- 

7 Wipe down the length of the power cord (if applicable).
- 

8 Clean the base of the thermometer. Using a new wipe, clean the base's top, sides and bottom.
- 

9 Leave the electric thermometer to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

10 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

11 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Patient Call Bell



Responsibility

The person responsible for cleaning the patient call bell are those who are responsible for cleaning a bed space when a patient has been discharged or responsible for regular cleaning whilst a patient is using the bed. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.

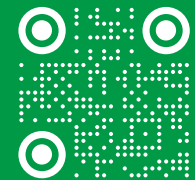


Cleaning Frequency

In between patient use, if the device becomes visibly soiled or weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220082





Cleaning Protocol Patient Call Bell



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

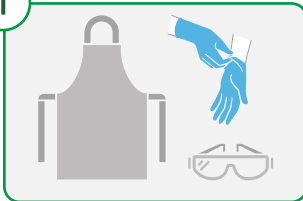
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Unfold each wipe fully before using. When working on flat surfaces, wipe in an 'S' shaped pattern to ensure all the surfaces are cleaned and disinfected.

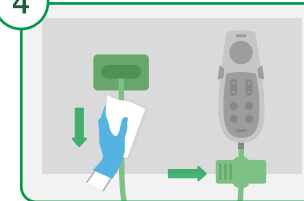
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

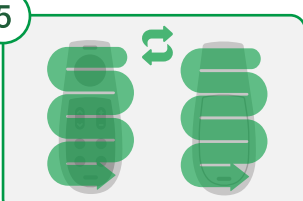
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

- 

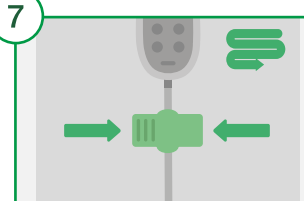
Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

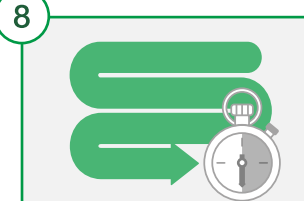
Always wipe from clean to dirty.
- 

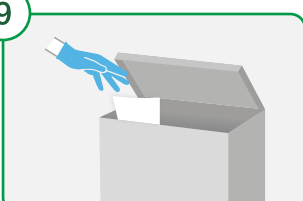
You'll need approximately 2-3 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

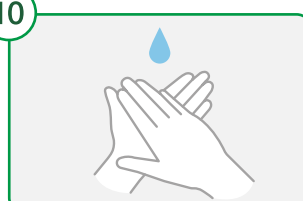
Begin cleaning where the cable enters the system baseplate on the wall, wiping down towards the handset, including any clips along the cable.
- 

Wipe the front side of the handset, followed by the back.
- 

Ensure that all switches and knobs are not missed during cleaning.
- 

Using a new wipe, clean any brackets that might be used to hold the call bell.
- 

Leave all equipment to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.



The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

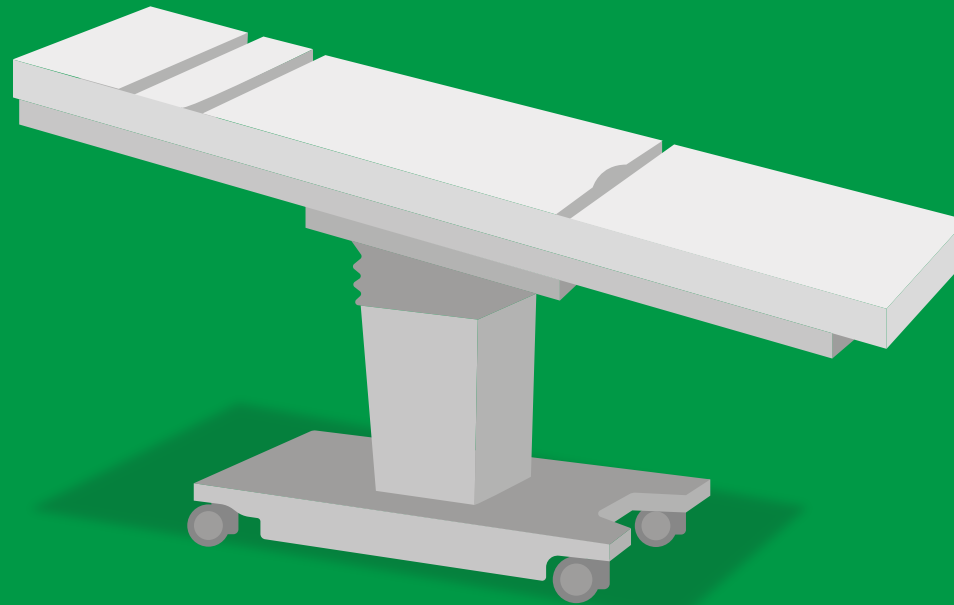


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Operating Table



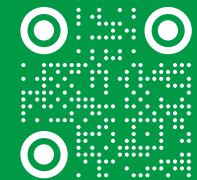
Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



Cleaning Frequency

In between patient use, weekly for infrequent use or cover with a protective sheet and clean before next use.



Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.



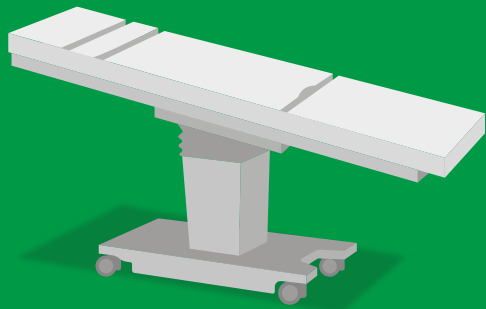
GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

JBN220191



Cleaning Protocol Operating Table



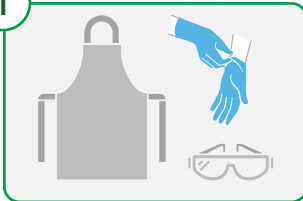
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

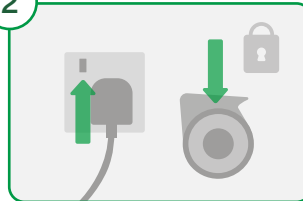
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

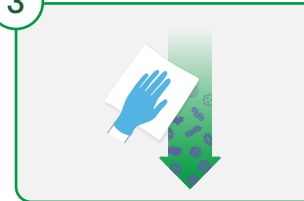
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

- 

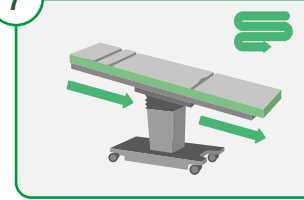
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

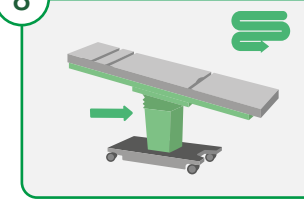
2 Remove all consumables from the operating table and ensure any power supply has been switched off.
- 

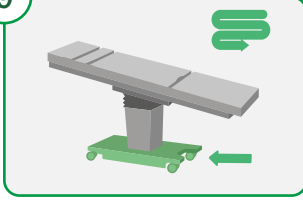
3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

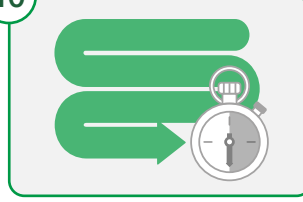
4 Depending on the size of the operating table, you will need 6-8 wipes. Replace wipes when they dry out or become visibly soiled.
- 

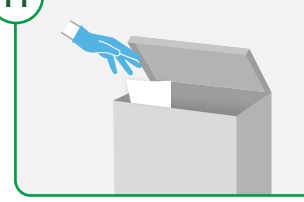
5 Start at the top of the table wipe down the top surface in an 'S' shaped pattern. Ensure all crevices are also wiped.
- 

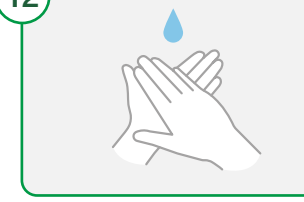
6 Clean all table pads' top, sides and bottom in the same 'S' shaped pattern. Once wiped, leave pads to air dry.
- 

7 With a new wipe, clean the sides of the top surface.
- 

8 Wipe down all sides of the trunking with a new wipe in the same 'S' shaped pattern.
- 

9 Clean the base of the table, including any wheels and brakes. Clean all exposed surfaces, ledges, brackets, cables or hoses.
- 

10 Leave operating table to air dry, ensuring sufficient contact time with disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Patient Examination Couch



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



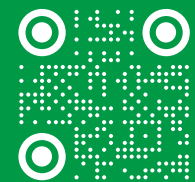
Cleaning Frequency

After patient use, if it becomes visibly soiled and weekly.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.

JBN220180



Cleaning Protocol Patient Examination Couch



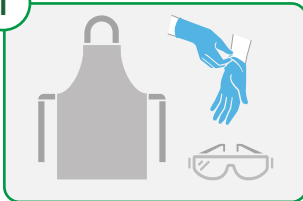
This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage. Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

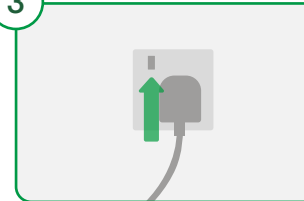
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

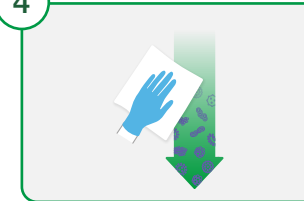
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

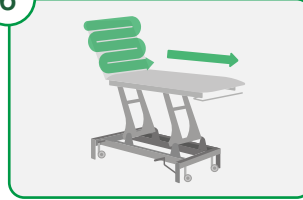
- 

1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

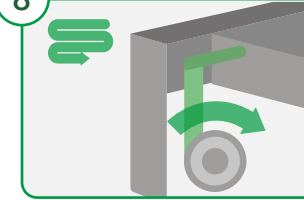
2 Remove any couch roll/linen that has been used.
- 

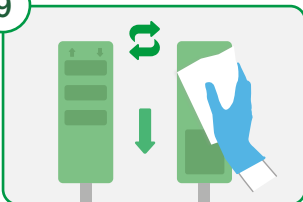
3 Disconnect any power supply before cleaning, if it is safe and appropriate to do so.
- 

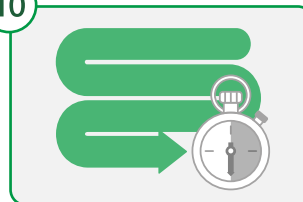
4 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

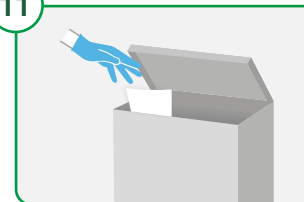
5 Depending on the size of the examination couch, you will need 4-6 wipes. Replace wipes when they dry out or become visibly soiled.
- 

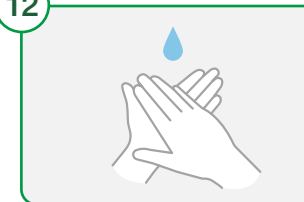
6 Starting at the top of the examination couch, wipe in an 'S' shaped pattern to the other end of the couch.
- 

7 Using a new wipe, clean any rails attached to the examination couch.
- 

8 Take a fresh wipe and clean the couch frame, including wheels and brakes.
- 

9 Clean any handset by wiping the front and then the back of the handset.
- 

10 Leave the patient examination couch to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

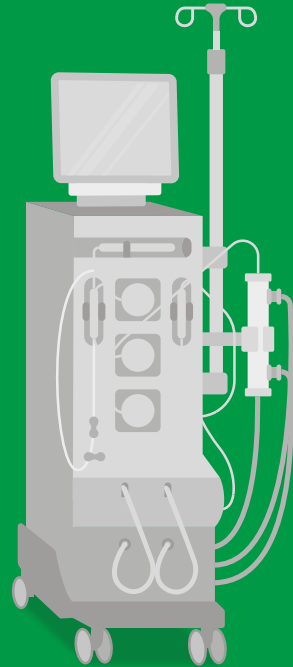


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Dialysis Machine



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



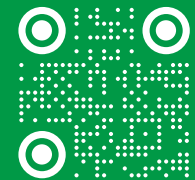
Cleaning Frequency

In between patient use, or if the device is visibly soiled. After surface disinfection, the dialysis machine must undergo chemical or thermal disinfection.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

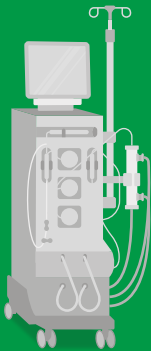


Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220229



Cleaning Protocol Dialysis Machine



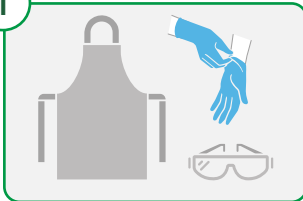
Always check manufacturer's instructions before cleaning, including for cleaning or not cleaning sensors and connectors such as venous pressure luer connectors, single-needle pressure luer connectors, blood/air connectors, temperature sensors and blood volume monitors.

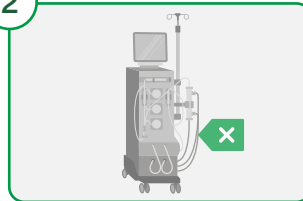
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

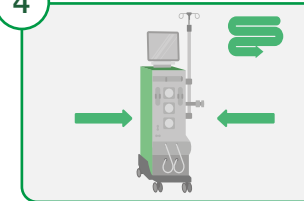
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

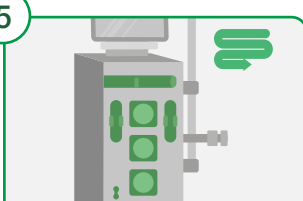
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

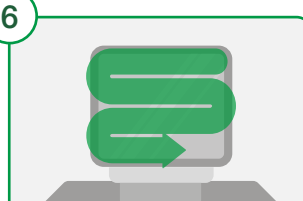
- 

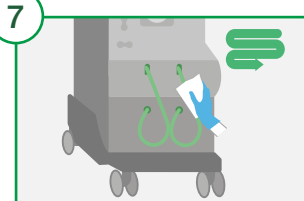
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

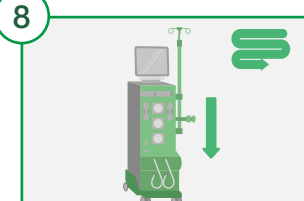
2 Disconnect and remove all consumables from the dialysis machine. Before cleaning, ensure all connectors are covered or stowed before cleaning.
- 

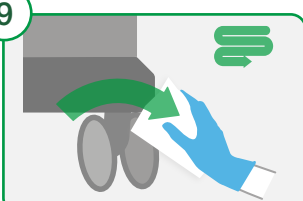
3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

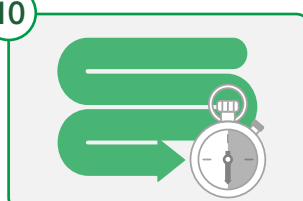
4 Clean the top of the top and sides of the machine, replacing your wipe should it dry out or become visibly soiled.
- 

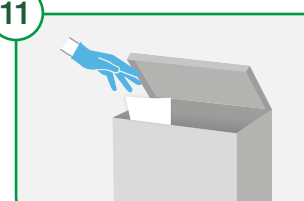
5 Clean the front surface of any control panels doors, then the insides.
- 

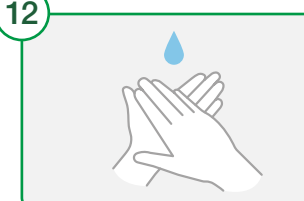
6 Wipe all areas of the main screen, including the back of the machine. If available, use the pause feature or screen wipe option.
- 

7 Using a new wipe, clean the surfaces of the dialysate, concentrate and bicarb connectors.
- 

8 Clean the areas between the screen and brakes, including any ledges, brackets and exposed surfaces with a new wipe.
- 

9 Clean the wheels and brakes.
- 

10 Leave the dialysis machine to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

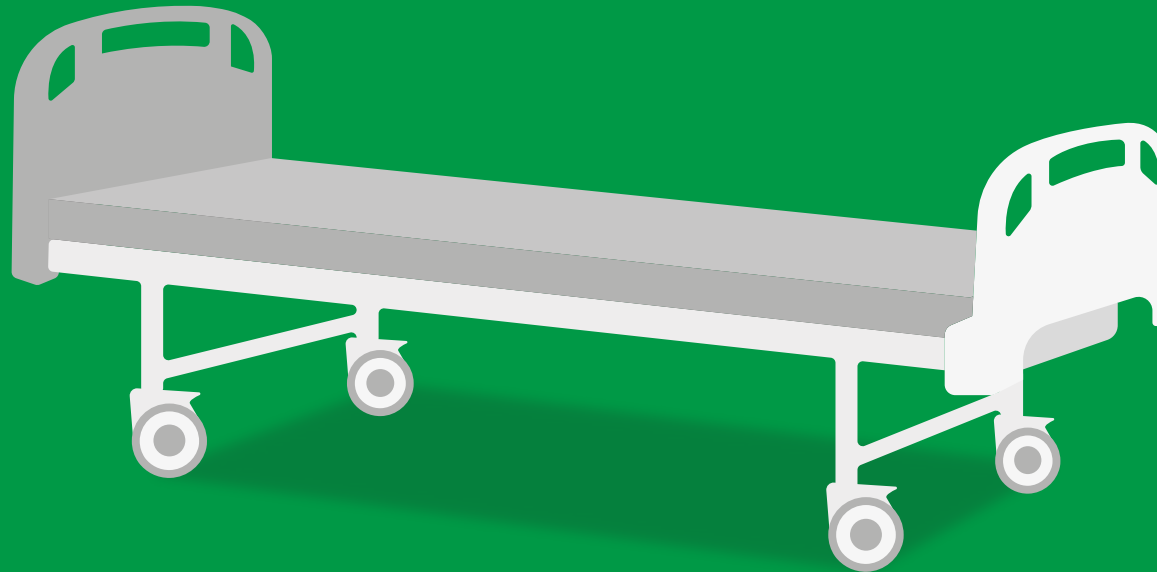


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Mattress



Responsibility

The person responsible for cleaning a mattress are those who are responsible for cleaning a bed space when a patient has been discharged or responsible for regular cleaning whilst a patient is using the bed. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.

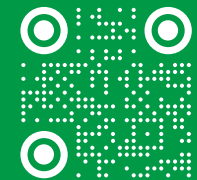


Cleaning Frequency

In between patient use, if the mattress becomes visibly soiled or weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

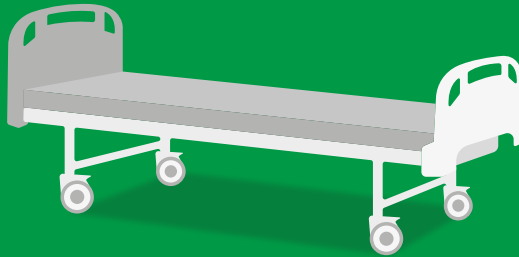


Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220081



Cleaning Protocol Mattress



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

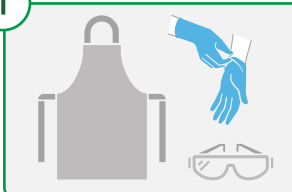
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

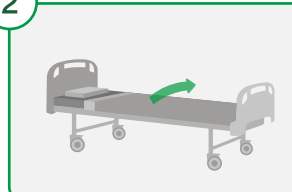
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Open each wipe and cover the flatter surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

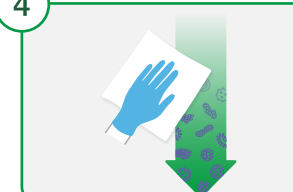
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

- 

1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

2 Apply the brakes and raise to a suitable height. Remove or dispose of any bedding that may be covering the mattress, as per your local linen protocol.
- 

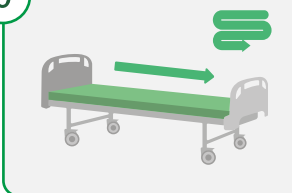
3 Check inside the mattress for any fluid leakage or strike-through. Should the mattress be damaged or contaminated, follow your local protocol to condemn the mattress.
- 

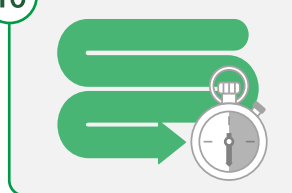
4 Always wipe from clean to dirty.
- 

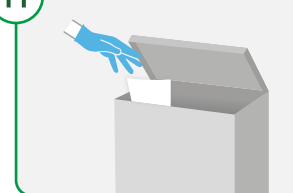
5 All surfaces should be covered with approximately 3-5 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

6 Start at the furthest edge of the mattress and wipe in an 'S' shaped pattern, working towards the nearest edge.
- 

7 Clean the sides of the mattress with a new wipe.
- 

8 Leave the mattress to air dry before turning over.
- 

9 Repeat the process on the underside.
- 

10 Leave the mattress to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Bed Frame



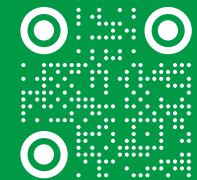
Responsibility

Cleaning a bed frame is the responsibility of the person who cleans the bed space when a patient is discharged. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



Cleaning Frequency

In between patients, weekly for long term patients or as required.



Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

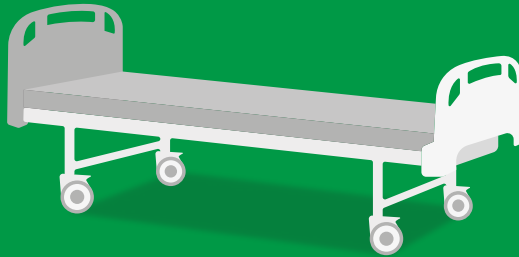


GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

JBN211038



Cleaning Protocol Bed Frame



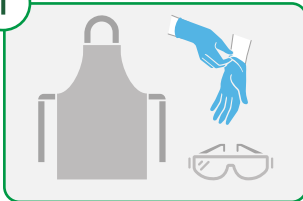
This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage. Always check manufacturer's instructions before cleaning and follow any local protocols.

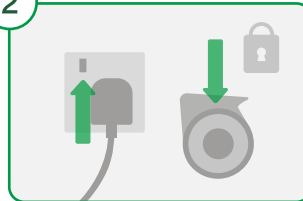
Clinell Universal Wipes are 2-in-1 cleaning and disinfectant wipes. Visible soilage or blood on surfaces can be removed with Clinell Universal, no pre-cleaning is required.

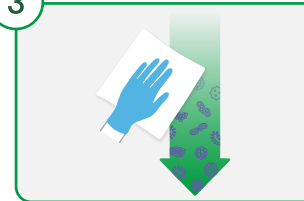
Unfold each wipe fully before using. When working on flat surfaces, wipe in an 'S' shaped pattern to ensure all the surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe dries out or becomes soiled at any time, replace with a new one, do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment, always use a new wipe.

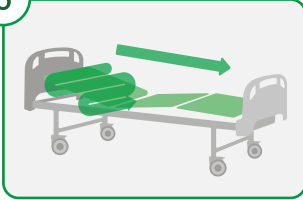
Do not flush the wipe down the toilet and do not put in a macerator.

- 

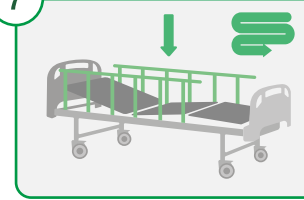
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

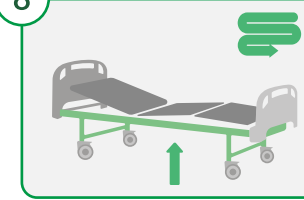
2 Remove any consumables and ensure any power supply is switched off (if safe to do so). Apply the brakes and raise to a suitable height.
- 

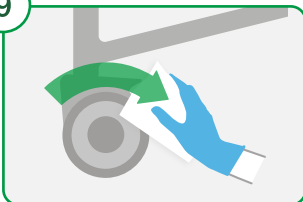
3 Always wipe from clean to dirty.
- 

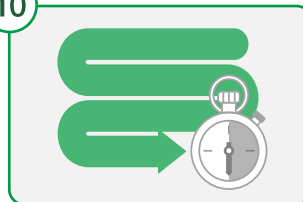
4 You'll need approximately 5-7 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

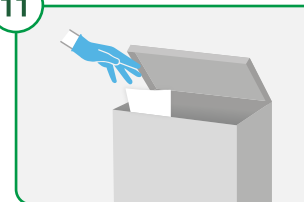
5 Wipe in an 'S' shaped pattern from the head of the bed to the bottom.
- 

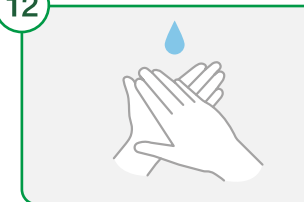
6 Use the same method to wipe both sides of the headboard and footboard.
- 

7 If the bed has rails or cot sides, clean these also (see separate crib sheet for a step-by-step guide to cleaning bed rails).
- 

8 Make sure all exposed surfaces including ledges, brackets and cables are cleaned. Remove detachable sections to clean, where possible.
- 

9 Lastly, clean the wheels.
- 

10 Leave to air dry to allow the disinfectant enough contact time to work.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

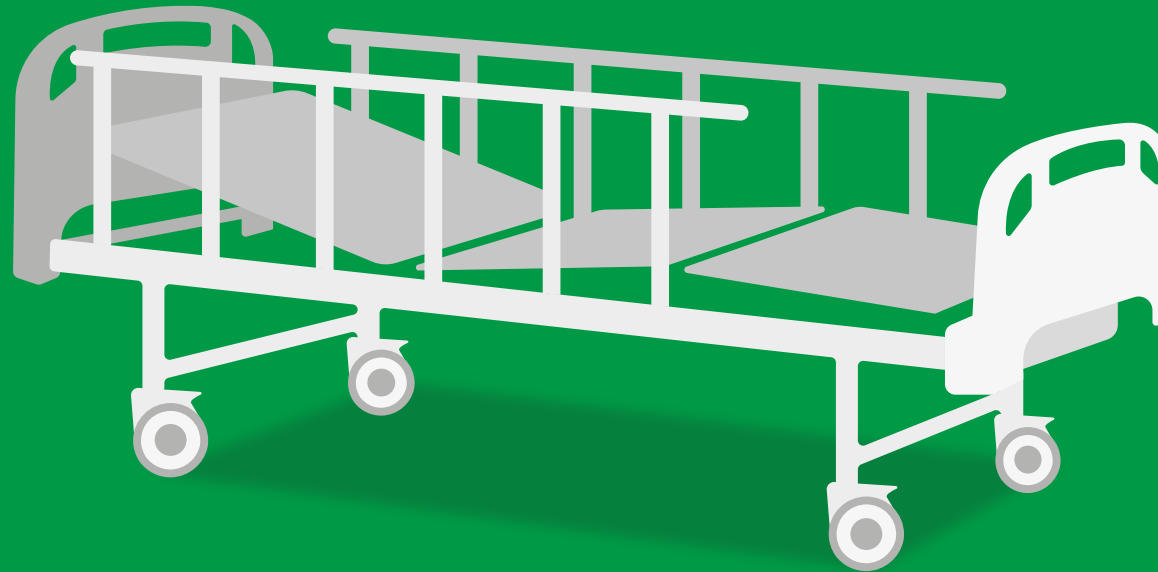


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Cot Sides or Bed Rails



Responsibility

The person responsible for cleaning cot sides or bed rails are those who are responsible for cleaning a bed space when a patient has been discharged or responsible for regular cleaning whilst a patient is using the bed. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.

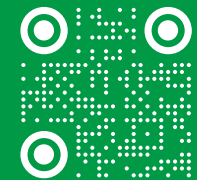


Cleaning Frequency

In between patient use, if the cot sides or bed rails becomes visibly soiled or weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220060



Cleaning Protocol Cot Sides or Bed Rails



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Open each wipe and cover the flatter surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

- Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- Remove anything attached to the rails, such as a bed control panel. Apply the brakes and raise to a suitable height.
- Always wipe from clean to dirty.
- Use approximately 2 wipes, using a separate wipe for each cot side or bed rail. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- Start at one side of the rails and wipe over the entire length of each rail and all surfaces.
- Wipe each supporting vertical rail.
- Wipe the section where the rails connect to the bed.
- Make sure all exposed surfaces including ledges, brackets and cables are cleaned. Remove detachable sections to clean, where possible.
- Leave to air dry to allow sufficient 'contact time' with the disinfectant.
- Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Hospital Chair



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



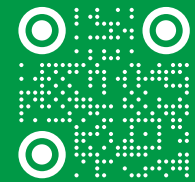
Cleaning Frequency

In between patient use, should the chair become visibly soiled or contaminated, or weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

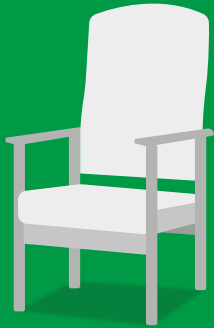


Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.

JBN220205



Cleaning Protocol Hospital Chair



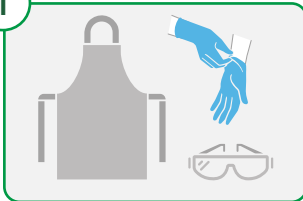
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

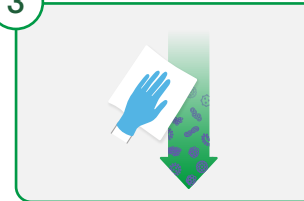
Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

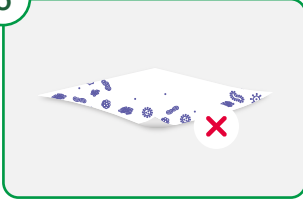
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

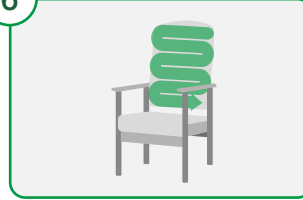
- 

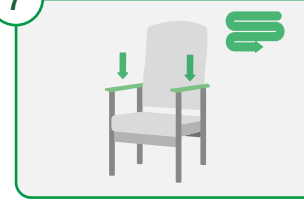
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

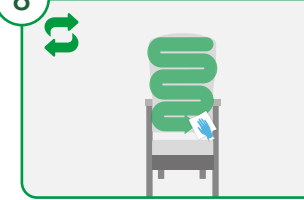
2 Remove any consumables attached or covering the chair.
- 

3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

4 Depending on the type of chair, all surfaces should be covered with approximately 3-5 wipes.
- 

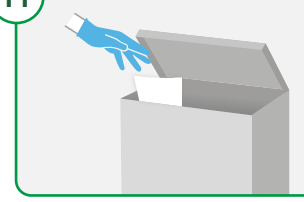
5 Always replace your wipe should it dry out or become visibly soiled.
- 

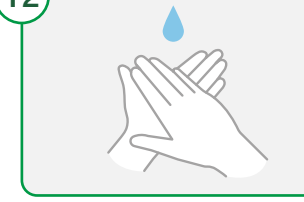
6 Starting at the top of the chair, follow an 'S' shaped pattern down the front surface of the chair back.
- 

7 With a new wipe, clean the top and underside of the armrests.
- 

8 Clean the back and underside of the chair with a new wipe in the same 'S' shaped pattern.
- 

9 Clean the chair legs from top to bottom in one fluid motion.
- 

10 Leave the chair to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

12 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

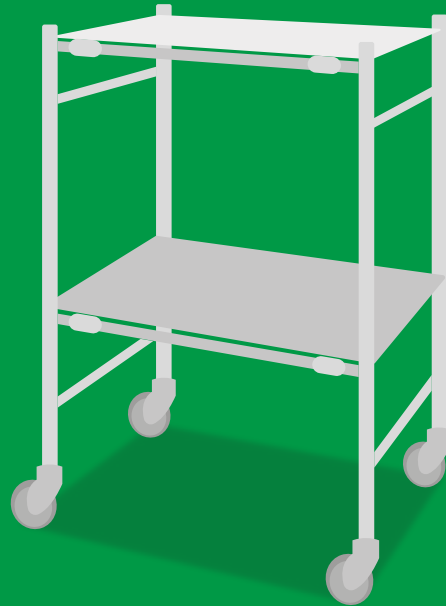


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Dressing Trolley



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



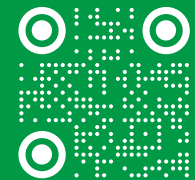
Cleaning Frequency

Before and after each use, or weekly if not used regularly.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

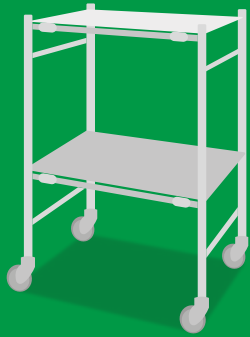


Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.

JBN220231



Cleaning Protocol Dressing Trolley



This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage.

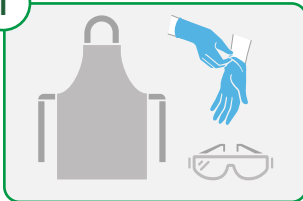
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

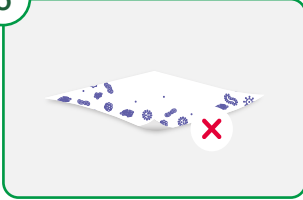
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

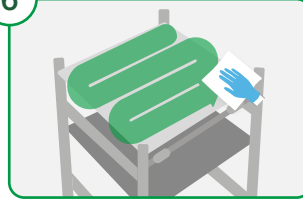
- 

1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

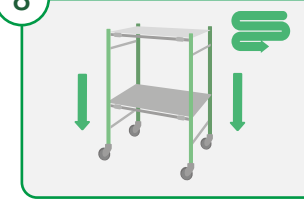
2 Remove any consumables from the trolley.
- 

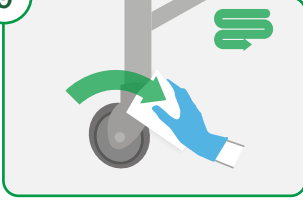
3 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

4 Approximately 2-3 wipes should be used, depending on the trolley size.
- 

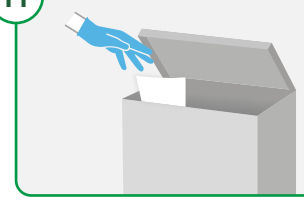
5 Always replace your wipe should it dry out or become visibly soiled.
- 

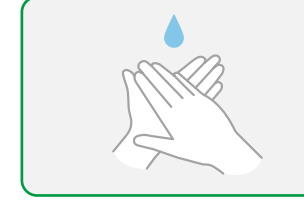
6 Starting at the furthest edge of the top surface, wipe downwards in an 'S' shaped pattern.
- 

7 Repeat on any subsequent flat surfaces.
- 

8 With a new wipe, clean each leg from top to bottom.
- 

9 Clean all wheels and brakes where applicable, including any exposed areas, handles, ledges and brackets.
- 

10 Leave the trolley to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

11 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required, complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

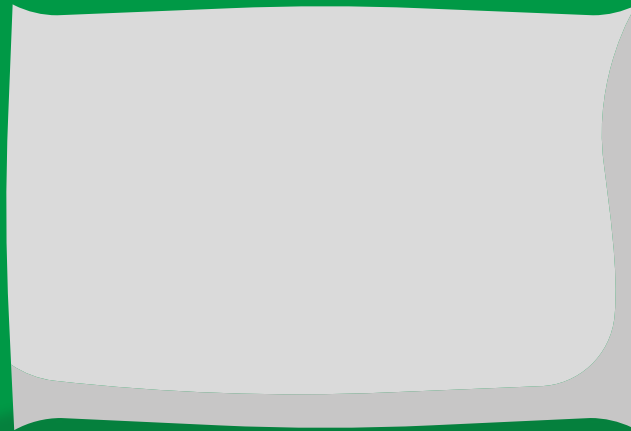


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Pillow



Responsibility

Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.



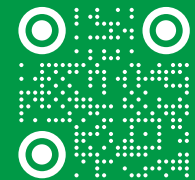
Cleaning Frequency

When a patient has been discharged, is no longer required prior to storage or if visibly soiled or contaminated—clean weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.

T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220204



Cleaning Protocol Pillow



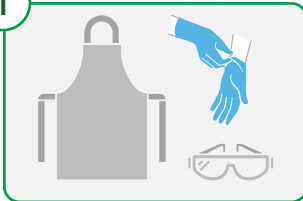
This guide should be used with consideration as to whether the pillow is being used by a patient or is currently in storage. In a healthcare setting, pillows usually have a waterproof cover. This guide has been designed for pillows like this. Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

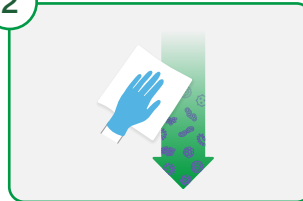
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Open each wipe and cover the flat surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

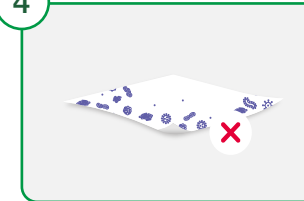
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

- 

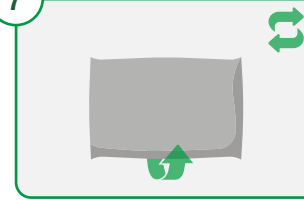
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

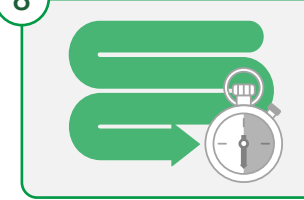
2 Always wipe surfaces from clean to dirty.
- 

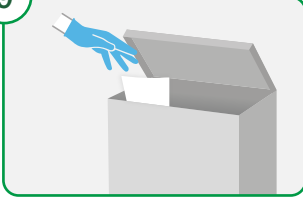
3 Approximately 1-2 wipes will be required to clean a pillow.
- 

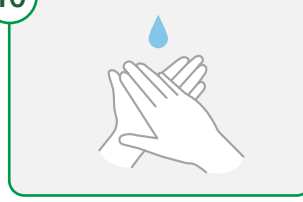
4 Always replace your wipe should it dry out or become visibly soiled.
- 

5 Following an 'S' shaped pattern, clean one side of the pillow.
- 

6 Leave the pillow to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

7 Turn the pillow over and repeat on the other side.
- 

8 Leave the pillow to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

9 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

10 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Bedside Cabinet or Locker



Responsibility

The person responsible for cleaning cabinets or lockers are those who are responsible for cleaning a bed space when a patient has been discharged or responsible for regular cleaning whilst a patient is using the bed. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.

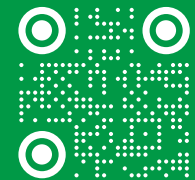


Cleaning Frequency

In between patient use, if the bedside cabinet or locker becomes visibly soiled or weekly for long term patients.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com

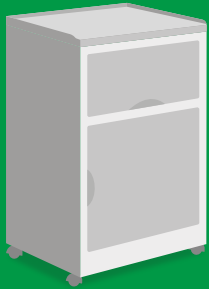


Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.

JBN220076



Cleaning Protocol Bedside Cabinet or Locker



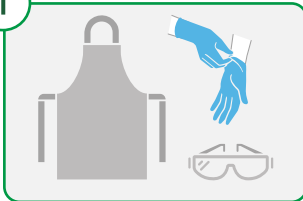
This guide should be used with consideration as to whether the equipment is being used by a patient or is currently in storage. Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

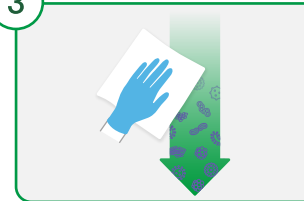
Open each wipe and cover the flatter surface areas, wiping in a simple 'S' shape motion to ensure all surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

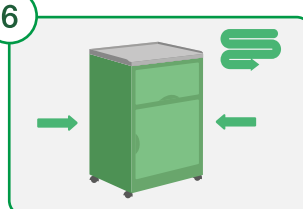
- 

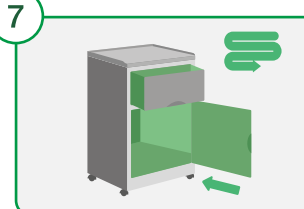
1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

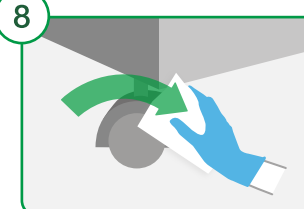
2 Remove any items on or within the cabinet/locker.
- 

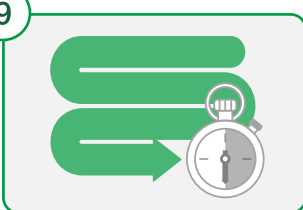
3 Always wipe from clean to dirty.
- 

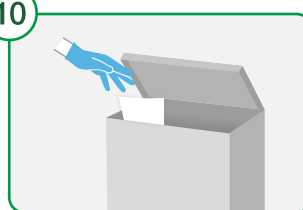
4 All surfaces should be covered with approximately 3-5 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

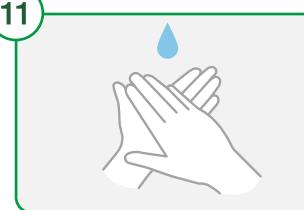
5 Start on the top of the cabinet and clean in an 'S' shaped pattern over the surface.
- 

6 Use the same 'S' shaped pattern to wipe the cabinet sides.
- 

7 Wipe inside the cupboards and drawers.
- 

8 Ensure all exposed surfaces, the underside, ledges, brackets, handles and wheels are cleaned.
- 

9 Leave the cabinet or locker to air dry, allowing sufficient contact time with the disinfectant.
- 

10 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

11 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty

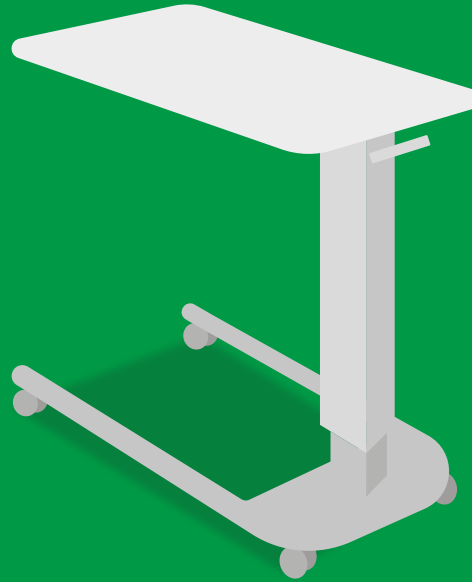


4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Bedside Table



Responsibility

The person responsible for cleaning a bedside table are those who are responsible for cleaning a bed space when a patient has been discharged or responsible for regular cleaning whilst a patient is using the bedside table. Most commonly, this will apply to healthcare support workers, nurses and dedicated cleaning staff.

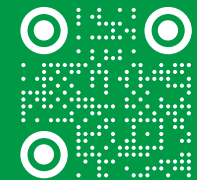


Cleaning Frequency

In between patient use, daily and as required before/after mealtimes.



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



Please scan the QR code to find out more information about our Clinnell Universal Wipes.

JBN220090



Cleaning Protocol Bedside Table



This guide should be used with consideration as to whether the bedside table is being used by a patient or not.

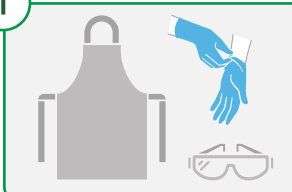
Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

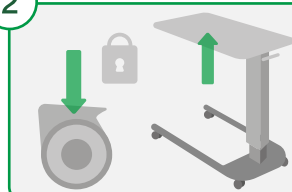
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Unfold each wipe fully before using. When working on flat surfaces, wipe in an 'S' shaped pattern to ensure all the surfaces are cleaned and disinfected.

If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

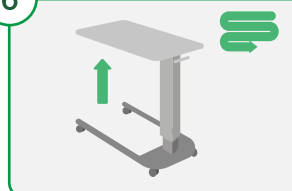
- 

1 Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

2 Remove any items from the tabletop, apply the brakes and set to a suitable height.
- 

3 Always wipe from clean to dirty.
- 

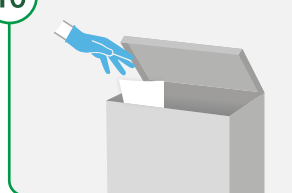
4 All surfaces should be covered with approximately 3-5 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

5 Begin cleaning the top surface, wiping in an 'S' shaped pattern.
- 

6 Repeat the same pattern on the underside of the table with a new wipe.
- 

7 With a new wipe, clean the legs, base, wheels & brakes.
- 

8 Clean all exposed surfaces, ledges and brackets and handles.
- 

9 Leave table to air dry, ensuring sufficient contact time with disinfectant.
- 

10 Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

11 Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.

The 5 Principles of Cleaning



1 Wipe in an 'S-Shaped' pattern



2 Work from top to bottom



3 Wipe from clean to dirty



4 Ensure correct contact time



5 One wipe, one surface

Cleaning Protocol Desk Telephone



Responsibility

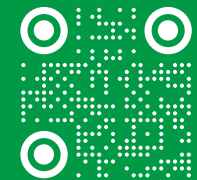
Those responsible for cleaning a desk telephone are the user and dedicated cleaners as part of their regular cleaning routines. While it may vary in different healthcare premises, this most commonly refers to housekeepers or cleaners. However, if there is visible soiling on the device, the person using the telephone should follow this protocol.



Cleaning Frequency
Daily



GAMA Healthcare Ltd., The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, UK.
T: +44 (0)20 7993 0030 E: info@gamahealthcare.com gamahealthcare.com



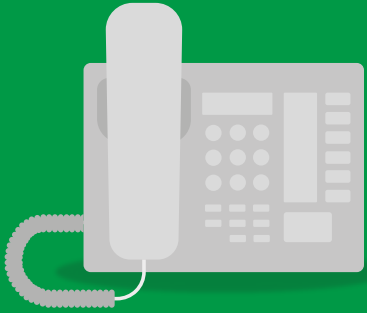
Please scan the QR code to find out more information about our Clinell Universal Wipes.

JBN220091



clinell®

Cleaning Protocol Desk Telephone



Always check the manufacturer's instructions before cleaning.

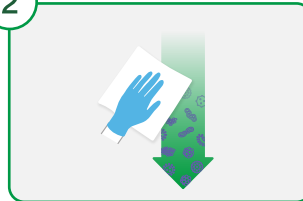
Visible soilage or blood on surfaces can be removed with a Clinell Universal Wipe. Each wipe is a 2-in-1 detergent/disinfectant wipe, removing soilage with a detergent component while simultaneously disinfecting the surface with a disinfection component.

Unfold each wipe fully before using. When working on flat surfaces, wipe in an 'S' shaped pattern to ensure all the surfaces are cleaned and disinfected.

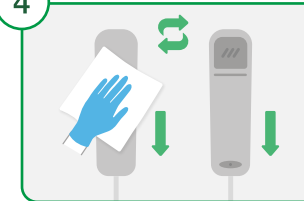
If the wipe becomes soiled or dries out at any time, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe. Do not use the same wipe on multiple pieces of equipment. Always use a new wipe.

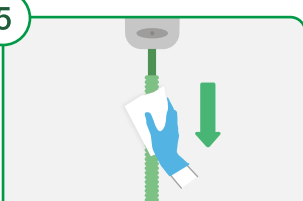
Do not flush wipes down the toilet or put them in a macerator.

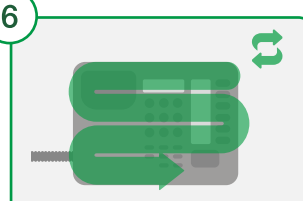
- 

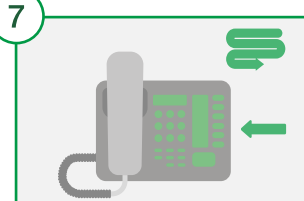
Wash or decontaminate your hands and put on PPE (risk assessment to ensure appropriate PPE is worn, as per local protocol).
- 

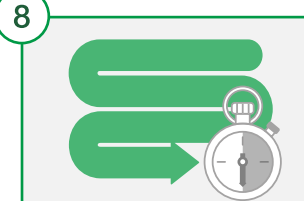
Always wipe from clean to dirty.
- 

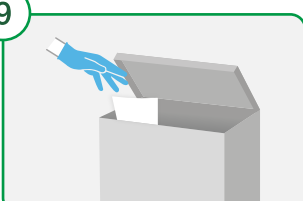
You'll need approximately 1-2 wipes. Should your wipe dry out or become soiled, replace it with a new wipe. Do not re-wet the wipe.
- 

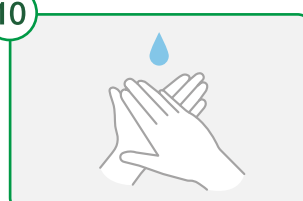
Remove the handset from the base, cleaning both sides with a wipe.
- 

In a fluid motion, wipe down the cable until you reach the base.
- 

Using a new wipe, clean both sides of the base in an 'S' shaped motion.
- 

Wipe over any exposed surfaces such as buttons and switches.
- 

Leave to air dry, ensuring sufficient contact time with disinfectant.
- 

Dispose of cleaning wipes as per local protocol.
- 

Remove PPE, wash or decontaminate hands and if required complete a record of cleaning, as per your local protocols.



Μαζί χτίζουμε

την ασφάλεια

της υγείας

clinell®



UNIVERSAL
WIPES



PERACETIC ACID
WIPES

Φυλλάδια

Clinell® Universal Wipes

Clinell® Peracetic Acid Wipes



clinell®

www.clinell.com

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

UNIVERSAL WIPES

Απολυμαντικά Πανάκια **Καθημερινής Χρήσης**

Τα πιο αξιόπιστα πανάκια στη Μ. Βρετανία

ΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ

SARS-CoV-2

ΣΕ **30"**

Καθαρισμός & Απολύμανση σε μία κίνηση. ✓

Ευρεία συμβατότητα με επιφάνειες. ✓

Πλούσια εμποτισμένα με μεγάλο μέγεθος. ✓

Σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση. ✓

Δραστικά από μόλις 10 δευτερόλεπτα. ✓

Αποδεδειγμένα καταστρέφουν τουλάχιστον το **99,99%** των **μικροβίων** εντός 1 λεπτού όπως: Χρυσίζοντα Σταφυλόκοκκο, Υπατίτιδα, Εντερόκοκκο, E. Coli, Φυματίωση, Αδενοϊό, Νοροϊό, Κορωνοϊό, κ.α.



CE 0050

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Λεωφόρος Μαραθώνος 112 Τ: 2108049747
15344 Γέρακας F: 2108049377
info@biokon.gr
www.bikon.gr

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD



biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD



Καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών, επιφανειών και εξοπλισμού.

Σχεδιασμένα να μεγιστοποιούν την απολύμανση και να ελαχιστοποιούν την προσπάθεια. Μία κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματική εναλλακτική λύση στα πρωτόκολλα δύο σταδίων (καθαρισμού και απολύμανσης)¹.

Η χρήση των Clinell® Universal Wipes

βελτιώνει τη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα καθαρισμού και απολύμανσης² ενώ συμβάλλει στη τήρησή τους³.

Έτοιμα προς χρήση και τοποθετημένα κοντά στα σημεία εφαρμογής τους, μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας από την συσκευασία. Χωρίς αραιώσεις και προετοιμασίες.

Χρόνος

Η χρήση των Clinell® Universal Wipes, σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα και την υποστήριξη των εκπαιδευτών νοσηλευτών και κλινικών εκπαιδευτών IPC της GAMA, συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου για κάθε αντικείμενο που απολυμαίνεται.

απαιτούμενος χρόνος απολύμανσης ανά είδος **>5 λεπτά**
Shepherd et al. J Infect Prev. 2020;21(6):241-246.

Συμμόρφωση

Η αύξηση της διαθεσιμότητας του προϊόντος στα σημεία χρήσης, μαζί με την εκπαίδευση και τον έλεγχο, προάγει τη συμμόρφωση και την τήρηση με το πρωτόκολλο.

αύξηση συμμόρφωσης 66% με το πρωτόκολλο απολύμανσης
Jenkins et al. J Clin Audit. 2012;4(3)

Ισχυρή απόδοση. Ανώτερη ποιότητα.

Η **πατενταρισμένη φόρμουλα** των Clinell® Universal Wipes βασίζεται σε ένα καινοτόμο μείγμα ενώσεων τεταρτοταγούς αμμωνίου και πολυμερικής διγουανιδης, που δρουν συνδυαστικά και επιτυγχάνουν ισχυρή απολύμανση μέσω διαφορετικών μηχανισμών βιοκτόνου δράσης για κάθε συστατικό. Διασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα **αντιμικροβιακής αποτελεσματικότητας** ενώ λειτουργεί **κατά της μικροβιακής αντοχής**.

Τα εμποτισμένα πανάκια υπερέχουν των στεγνών.

Πανάκια που έχουν κατασκευαστεί από ακατάλληλο υλικό, μπορεί να είναι αναποτελεσματικά ενάντια σε μικροοργανισμούς, καθώς η μοριακή σύνθεση του υλικού κατασκευής μπορεί να αλλοιώσει τη δράση των απολυμαντικών, δεσμεύοντας και αδρανοποιώντας τα συστατικά τους⁴.



Αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα. Δοκιμασμένο σε ανεξάρτητα εργαστήρια υπό βρώμικες συνθήκες.

Συνθήκες δοκιμής, λογαριθμική μείωση και χρόνοι επαφής επιδεικνύουν την κλινική απόδοση ενός απολυμαντικού.

Στην Clinell® πραγματοποιούνται ενδεδειγμένοι έλεγχοι για να πιστοποιηθεί ότι όλοι οι χρόνοι επαφής και οι σχετικοί ισχυρισμοί αποτελεσματικότητας των προϊόντων της, είναι επιτεύξιμοι σε πραγματικές συνθήκες. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύνθεση των Clinell® Universal Wipes έχει δοκιμαστεί αυστηρά με βάση Πρότυπα EN Τεστ, υπό βρώμικες συνθήκες για την προσομοίωση πραγματικών συνθηκών και χρόνων επαφής.

Η διεξαγωγή δοκιμών αποτελεσματικότητας σε καθαρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διαπιστώσεις ως προς τη πραγματική απόδοση ενός απολυμαντικού.

Οι μη εφαρμόσιμοι, εκτεταμένοι χρόνοι επαφής μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποτελεσματικά προϊόντα.

	Παραδείγματα μικροοργανισμών	Χρόνος Επαφής	EN TEST	Συνθήκες
Gram-negative bacteria	Acinetobacter baumannii	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Escherichia coli	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Klebsiella pneumoniae (CPE)	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Pseudomonas aeruginosa	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
Gram-positive bacteria	Enterococcus hirae	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Staphylococcus aureus (MRSA)	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Staphylococcus capitis	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Enterococcus faecium (VRE)	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
Mycobacteria	Mycobacterium bovis	2 λεπτά	EN14348	Βρώμικες
Non-enveloped viruses	Norovirus	1 λεπτό	EN14476	Βρώμικες
	Rotavirus	1 λεπτό	EN14476	Βρώμικες
Enveloped viruses	HIV	30 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Hepatitis C	1 λεπτό	EN14476	Βρώμικες
	SARS-CoV-2	30 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Vaccinia virus	15 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Influenza (H5N1)	30 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Influenza (H1N1, H3N2)	2 λεπτά	EN14476	Βρώμικες
Yeast	Candida albicans	10 δευτ.	EN16615	Βρώμικες
	Candida auris	10 δευτ.	EN13624	Βρώμικες

Παραδείγματα εξοπλισμού που πρέπει να καθαρίζονται πάντα μετά από κάθε χρήση και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. (Η λίστα είναι ενδεικτική)

- Μηχανήματα Υπερήχων
- Αισθητήρες Οξύμετρου
- Αισθητήρες Doppler
- Στηθοσκόπια
- Συσκευές ECG
- Αντλίες Έγχυσης
- Συσκευές Αρτηριακής Πίεσης
- Ακτινολογικός Εξοπλισμός
- Θερμοκοιτίδες
- Μανσέτες Αρτηριακής Πίεσης
- Οθόνες
- Στρώματα

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ.

Πως να καθαρίσετε αποτελεσματικά



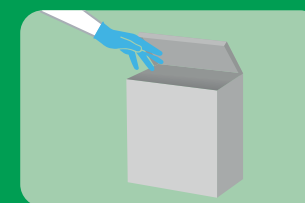
Πλύνετε ή απολυμάνετε τα χέρια σας και εφαρμόστε τα ενδεδειγμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.



Πάρτε ένα πανάκι από τη συσκευασία. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ διαφορετικό πανάκι σε κάθε νέα επιφάνεια.



Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα S, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές.



Χρησιμοποιήστε καινούργιο πανάκι όταν αυτό στεγνώσει ή βρωμίσει. Πετάξτε το βρώμικο στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ -ΣΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ- ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΣΤΡΕΨΕΙ.

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί παγκόσμια απειλή της υγείας.⁹

Η μη ορθολογική χρήση αντιβιοτικών έχει οδηγήσει στη μικροβιακή αντοχή (AMR). Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των λοιμώξεων πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες των εξάρσεων που επηρεάζουν τόσο τους ασθενείς όσο και το υγειονομικό σύστημα.

Χωρίς σωστή απολύμανση, οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν στις επιφάνειες για ώρες, ακόμη και ημέρες⁸, και να ενισχύσουν περαιτέρω την εξάπλωση λοιμώξεων.

Ο ανθεκτικός στη μεθικιλίνη Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA), ένας πολυανθεκτικός οργανισμός (MDRO), μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες για 12 ημέρες⁸.

Η μικροβιακή αντοχή δεν αφορά αποκλειστικά τα βακτήρια. Το Candida auris, προκαλεί μυκητιασική λοίμωξη και αποτελεί τον νέο κίνδυνο για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.



Clip Pack 50s
Μέσα από τη πρωτοβουλία ‘Design Bugs Out’, δημιουργήθηκε το **Clinell® Universal Clip Pack**, με ενσωματωμένο ένα πρακτικό κλιπ για ασφαλή και προσβάσιμη τοποθέτηση σε συσκευές παρακολούθησης ασθενή, ιατρικές καρέκλες, πλαίσια κρεβατιών, βάσεις οθόνης, τρόλεϋ κα.,

Ενεργός Έλεγχος Λοιμώξεων με προϊόντα Clinell®.

Η σειρά προϊόντων Clinell® προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την καθημερινή απολύμανση, τον τερματικό καθαρισμό, και την αντιμετώπιση εξάρσεων.

Ο συνδυασμός Clinell® Universal Wipes και Clinell® Peracetic Acid Wipes αποτελεί τον χρυσό κανόνα στην υγιεινή.

	Universal Wipes	Peracetic Acid Wipes
Χρήση		
Καθαρισμός ρουτίνας μεταξύ ασθενών	✓	
Πρόληψη και αντιμετώπιση ενδημικών εξάρσεων	✓	✓
Αποτελεσματικότητα		
Κλινικά αποδεδειγμένα μειώνει πολυανθεκτικά μικρόβια	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των βακτηρίων	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των ιών	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των ζυμομυκήτων	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των βακτηριακών σπόρων		✓
Καταστρέφει > 99,99% των μυκήτων & βιομεμβράνης		✓
Απόδοση		
Καθαρισμός	✓	✓
Απολύμανση	✓	✓
Δραστικό σε ξηρές συνθήκες	✓	✓
Χρόνος Δράσης		
Δραστικό από 10 δευτερόλεπτα	✓	✓

CLINELL® UNIVERSAL RANGE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CW200	Universal - Πακέτο με κλείστρο ασφαλείας τύπου Flip-Top	200 ΠΑΝΑΚΙΑ	6 ΠΑΚΕΤΑ
CWCP50	Clip Pack - Πακέτο με ενσωματωμένο κλιπ στήριξης	50 ΠΑΝΑΚΙΑ	24 ΠΑΚΕΤΑ
CWAB50	Adhesive Pack - Πακέτο με αυτοκόλλητη στήριξη	50 ΠΑΝΑΚΙΑ	24 ΠΑΚΕΤΑ
CWD	Wall Mounted Dispenser - Επιτοίχια βάση τοποθέτησης ανταλλακτικών πακέτων	--	20 ΒΑΣΕΙΣ



ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1. Casini B, Righi A, De Feo N, et al. Improving Cleaning and Disinfection of High-Touch Surfaces in Intensive Care during Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Endemo-Epidemic Situations. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(10):2305.

2. Jenkins EK, Silman F, Gosden PE. Sharps Tray Cleaning after use - A completed audit cycle. J Clin Audit. 2012; 4(3).

3. Martin ET, Dadon M, Lazarovitch T, Saadon H, Maya T, Jaffe K, Moscovich S, Zaidenstein R, Marchaim D. 1150. Cleaning High Touch Surfaces of Patients' Rooms: Make It Easier, and It Simply Gets Cleaner.

4. Bloss R, Meyer S, Kampf G. Adsorption of active ingredients of surface disinfectants depends on the type of fabric used for surface treatment. J Hosp Infect. 2010 May;75(1):56-61.

5. Shepherd E, Leitch A, Curran E. Infection Prevention and Control Team NHS Lanarkshire. A quality improvement project to standardise decontamination procedures in a single NHS board in Scotland. J Infect Prev. 2020;21(6):241-246.

6. Zimmerman P-A, Browne M, Rowland D. Instilling a culture of cleaning: Effectiveness of decontamination practices on non-disposable sphygmomanometer cuffs. J Infect Prev. 2018;19(6):294-299.

7. Garvey MJ, Wilkinson MAC, Bradle CW, Holden KL, Holden E. Wiping out MRSA: effect of introducing a universal disinfection wipe in a large UK teaching hospital. Antimicrob Resist Infect Control. 2018;7:155.

8. Huang R, Mehta S, Weed D, Price CS. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus survival on hospital fomites. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006 Nov;27(11):1267-9.

9. World Health Organisation. Antibiotic resistance. Published Jul 31, 2020 Accessed Mar 8, 2022. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance#:~:text=Bacteria%2C%20not%20humans%20or%20animals,hospital%20stays%2C%20and%20increased%20mortality.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

CE 0050 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IIA ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



GAMA Healthcare Ltd.
2 Regal Way, Watford, Hertfordshire, WD24 4YJ
T +44 (0)20 7993 0030 | www.gamahealthcare.com | info@gamahealthcare.com



clinell®

www.clinell.com

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

PERACETIC ACID WIPES

Απολυμαντικά Πανάκια Υπεροξικού Οξέος

Τα πιο αξιόπιστα πανάκια στη Μ. Βρετανία

ΚΛΙΝΙΚΑ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ
ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
ΠΑΝΑΚΙ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Αντιμετώπιση ενδημικών εξάρσεων. ✓

Αποτελεσματικότερα από το
χλώριο έναντι σπόρων, βιομεμβράνης,
και ανθεκτικών μικροοργανισμών.^{1,2} ✓

Σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση. ✓

Δραστικά από μόλις 10 δευτερόλεπτα. ✓

Αποδεδειγμένα καταστρέφουν τουλάχιστον
το **99,99%** των σπόρων εντός 2 λεπτών
σε πολύ βρώμικες συνθήκες³, ενώ έχουν την
ισχυρότερη δράση κατά της βιομεμβράνης
του **Candida Auris**⁴.



CE 0050

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.

Λεωφόρος Μαραθώνος 112 Τ: 2108049747
15344 Γέρακας F: 2108049377
info@biokon.gr
www.bikon.gr

biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD



biokon
MEDICAL & BIOTECH
PRODUCTS LTD

clinell®

Peracetic Acid Wipes



Στεγνά πανάκια παραγωγής υπεροξικού οξέος, που ενεργοποιούνται κατόπιν διαβροχής τους με νερό.

Σχεδιασμένα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδημικών εξάρσεων προσφέροντας υψηλού βαθμού απολύμανση. Κατάλληλα για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών και μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών.

Χρόνος: Ο περιορισμός της διαδικασίας καθαρισμού και απολύμανσης από δυο βήματα σε ένα βήμα, καθώς και η απλοποίηση της προετοιμασίας διαλυμάτων με ένα έτοιμο για χρήση προϊόν, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Το **90%** του προσωπικού ανέφερε ότι με την χρήση των Clinell® Peracetic Acid Wipes **μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος καθαρισμού.**

Martin et al. Open Forum Infectious Diseases. 2018;5(S1).

Κόστος: Η μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων ισοδυναμεί με μείωση του κόστους για το Νοσοκομείο. Τα Clinell® Peracetic Acid Wipes καταστρέφουν ακόμα και τις πιο ανθεκτικές κατηγορίες παθογόνων, εμποδίζοντας την εξάπλωση λοιμώξεων.

Τα **σημεία με πολυανθεκτικά παθογόνα μειώθηκαν σημαντικά** έπειτα από χρήση των Clinell® Peracetic Acid Wipes.

Siani et al. American Journal of Infection Control. 2018;46(10).

Συμμόρφωση: Η χρήση προ-εμποτισμένων προϊόντων αποκλείει σφάλματα που σχετίζονται με λανθασμένες δοσολογίες κατά την προετοιμασία των απολυμαντικών διαλυμάτων και έτσι διασφαλίζεται η σωστή δοσολογία και ο ενδεδειγμένος χρόνος επαφής σε κάθε εφαρμογή - ανεξαρτήτως χρήστη.

Ο **καθαρισμός των δωματίων με πανάκια αυξάνει τη συμμόρφωση** του προσωπικού **με το πρωτόκολλο καθαρισμού.**

Saha et al. American Journal of Infection Control. 2016;44(11).

“Ο συνδυασμός υπεροξικού οξέος στα 3500 ppm με non-woven πανάκι ήταν σημαντικά **πιο αποτελεσματικός στην εξάλειψη της βιομεμβράνης και του Candida Auris.**”

Ledwoch et al. Materials. 2019;12(8).

“Αποδεδειγμένα, **μόνο τα Clinell® peracetic acid wipes εμποδίζουν τη διασπορά των σπόρων.**”

Siani et al. American Journal of Infection Control. 2011;39(3).

“Τα Clinell® peracetic acid wipes είναι **πιο αποτελεσματικά στη μείωση των σπόρων** έναντι του χλωρίου.”

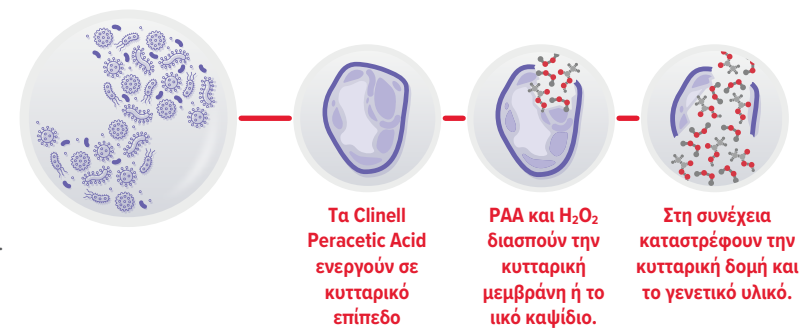
Doan et al. Journal of Hospital Infection. 2012;82(2).

“Το συνολικό ποσοστό των λοιμώξεων από **C. difficile μειώθηκε κατά 72%** έπειτα από τη χρήση των Clinell® peracetic acid wipes.”

Carter & Barry. Nursing Times. 2011;107(36).

Διασπούν κάθε γραμμή μικροβιακής άμυνας. Πλήρως βακτηριοκτόνα, μυκητοκτόνα & σποροκτόνα.

Τα Clinell® Peracetic Acid Wipes διαθέτουν ισχυρή σύνθεση απολύμανσης που συνδυάζει υπεροξικό οξύ (PAA) με βελτιστοποιημένο pH και υπεροξειδίο του υδρογόνου (H₂O₂), που παράγονται από υπερανθρακικό νάτριο και τετρα ακετυλο αιθυλενοδιαμίνη (TAED). Υψηλής ισχύος οξειδωση **καταστρέφει όλους τους μικροοργανισμούς**, συμπεριλαμβανομένων των μη εγκαψιδιωμένων ιών και των βακτηριακών ενδοσπόρων.



Πως να καθαρίσετε αποτελεσματικά



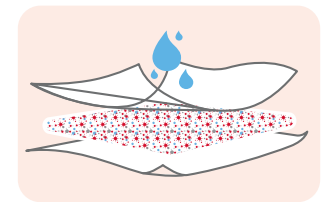
Πλύνετε ή απολυμάνετε τα χέρια σας και εφαρμόστε τα ενδεδειγμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.



Πάρτε ένα πανάκι από τη συσκευασία. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ διαφορετικό πανάκι σε κάθε νέα επιφάνεια.



Όταν είναι στεγνά παραμένουν ανενεργά. Για να ενεργοποιήσετε, το πανάκι, βρέξτε το με νερό.



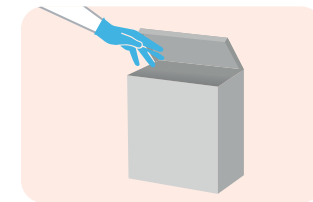
Το νερό θέτει σε δράση την ειδική πούδρα, παράγοντας υψηλά επίπεδα υπεροξικού οξέως και υπεροξειδίου του υδρογόνου.



Στίψτε το πανάκι για να απομακρύνετε την περίσσεια ποσότητα νερού. Σχεδιασμένα να απελευθερώνουν συγκεκριμένη ποσότητα απολυμαντικής δράσης ανά πανάκι.



Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα S, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές.



Πετάξτε το βρώμικο πανάκι στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

Αυτή η μοναδική μέθοδος εφαρμογής, διασφαλίζει τη **σταθερή και επαναλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα, χωρίς τυχόν σφάλματα** που σχετίζονται με τη διαδικασία αραίωσης των διαλυμάτων.

Πατενταρισμένη τεχνολογία με μοναδική σχεδίαση 2-στρώσεων.

Εύκολα και αποτελεσματικά



Με ειδικό σχεδιασμό που συνδυάζει 2 μη-υφασμένα πανάκια που φέρουν το μείγμα ειδικής πούδρας στο ενδιάμεσο στρώμα και παγιδεύουν τους μικροοργανισμούς διασφαλίζοντας την μη μεταφορά τους από μια βρώμικη περιοχή σε μια καθαρή.⁵



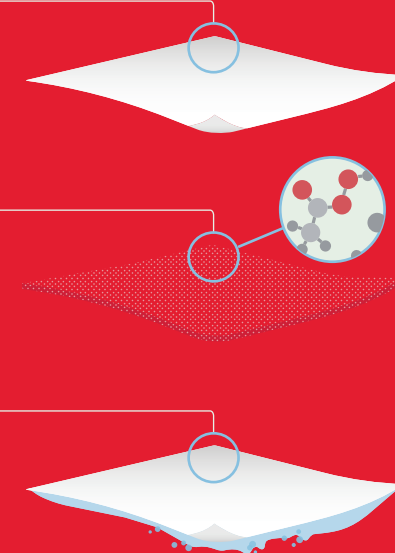
Απολύμανση χωρίς φθορές

Με εξαιρετική συμβατότητα υλικών, σε αντίθεση με άλλα προϊόντα υπεροξικού οξέος. Η δράση του υπεροξικού οξέος και του υπεροξειδίου του υδρογόνου επιτυγχάνει εξαιρετική απόδοση απολύμανσης, σχεδόν με ουδέτερο pH.



5x περισσότερη επιφάνεια

Κάθε πανάκι δύναται να καλύψει επιφάνεια ίση με αυτή για την οποία θα απαιτούνταν 5 απλά απολυμαντικά πανάκια εξοικονομώντας χρόνο, κόστος και πόρους.



Τα υλικά κατασκευής στα πανάκια είναι εξίσου **σημαντικά** τόσο για την απόδοσή τους, όσο και για το **διάλυμα εμποτισμού τους**⁶



Ενδημία λοιμώξεων.
Μείζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας.

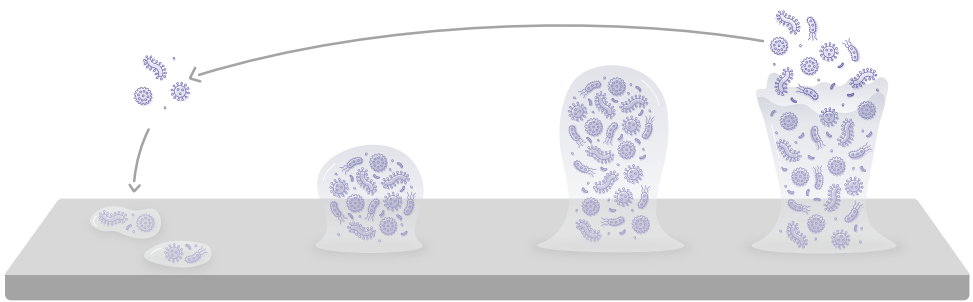
Η επιμόλυνση των επιφανειών ευνοεί σημαντικά τη μετάδοση ενδοноσοκομειακών λοιμώξεων. Η μείωση των παθογόνων στο περιβάλλον σημαίνει μείωση της διασποράς των λοιμώξεων.

Ξηρή βιομεμβράνη επιφανειών & Πολυανθεκτικοί οργανισμοί: 8-10
Οι μεγάλοι σύμμαχοι των μικροβίων.

Η **βιομεμβράνη** είναι ένα αόρατο στρώμα που προστατεύει και ευνοεί την ανάπτυξη μικροβιακών αποικιών, καθιστώντας αυτές πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Απολυμαντικά καθημερινής χρήσης μπορούν να καταστρέψουν μόνο τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται εξωτερικά της βιομεμβράνης, με αποτέλεσμα την επιβίωση ή την άμεση ανασύσταση -και κατ’ επέκταση την εξάπλωση- αυτών που βρίσκονται στο εσωτερικό της.

Η **μικροβιακή ανθεκτικότητα** οφείλεται στη μη ορθολογική χρήση αντιβιοτικών και συμβάλλει στην επιβίωση πολυανθεκτικών μικροοργανισμών σε αντίξοες συνθήκες, με παρατεταμένη διάρκεια.

Απολυμαντικά καθημερινής χρήσης δεν μπορούν να διασπάσουν τα κυτταρικά τοιχώματα ή το ιικό περίβλημα των πολυανθεκτικών παθογόνων.



Προβλήματα ανταγωνιστικών λύσεων.

Ασφαλής, και ευθέως ανταγωνιστική, εναλλακτική λύση στα προϊόντα χλωρίνης, αεροζόλ/διαλύματα με στεγνά πανάκια, αλλά και άλλα προϊόντα υπεροξικού οξέως.

Αναποτελεσματικές ενάντια σε βιομεμβράνη και πολυανθεκτικούς οργανισμούς.
Χλωρίνη: ενώ αρχικά παρουσιάζεται υψηλή λογαριθμική μείωση, οι βιομεμβράνες μπορούν ακόμα να μεταφέρουν παθογόνα στο περιβάλλον ενώ ανακτούνται πλήρως μετά από μερικές ώρες.²
Παραδοσιακές μέθοδοι (πανάκια/διαλύματα/αεροζόλ): Σε πολυανθεκτικούς οργανισμούς, όπως σπόροι, μικροί, μη-εγκαψιδιωμένοι ιοί, Gram-αρνητικά βακτήρια, και βακτηριακοί σπόροι, αυτές οι μέθοδοι είναι αναποτελεσματικές.¹²

Τοξικολογικοί κίνδυνοι
Χλωρίνη: Τα διαλύματα χλωρίνης ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για το χρήστη αλλά και τους ασθενείς, λόγω εκπομπής τοξικών αναθυμιάσεων και άλλων επικίνδυνων παραγώγων που μπορούν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και ερεθισμό ματιών, ρινικής οδού και δέρματος.¹³

Ανομοιογενής κατανομή βιοκτόνου υλικού
Αεροζόλ: οι ψεκασμοί μπορεί να καταλήξουν σε διαφορετική συγκέντρωση του απολυμαντικού υλικού στις επιφάνειες, με πιθανότητα τη δημιουργία περιοχών με ελλιπή συγκέντρωση βιοκτόνου υλικού που μπορεί να οδηγήσει τους μικροοργανισμούς στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.^{6,14}

Βελτιωμένος καθαρισμός και απολύμανση δωματίων και των επιφανειών τους, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνιση νοσοκομειακών λοιμώξεων.⁷



Μία βιομεμβράνη μπορεί να φιλοξενήσει πολλά διαφορετικά είδη παθογόνων. Μέσα στη βιομεμβράνη οι μικροοργανισμοί μπορούν να “ανταλλάξουν” γονίδια που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αντοχής στα αντιβιοτικά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την οριζόντια μεταφορά της ιδιότητας της αντοχής από μικροοργανισμό σε μικροοργανισμό.

το **95%** του εξοπλισμού που έχει απολυμανθεί, μπορεί να **εξακολουθεί να φιλοξενεί βιομεμβράνη**.¹¹

Τα περισσότερα προϊόντα υπεροξικού οξέος είναι πολύ όξινα. **Ανταγωνιστικά πανάκια υπεροξικού οξέος:** έχουν χαμηλό pH και δύναται να δημιουργήσουν φθορές σε ορισμένες επιφάνειες.

Απαιτείται προ-καθαρισμός
Χλωρίνη: αδρανοποιείται όταν έρθει σε επαφή με οργανική ύλη, που σημαίνει ότι πριν τη χρήση του διαλύματος χλωρίνης, η επιφάνεια πρέπει να έχει καθαριστεί.¹⁵

Απώλεια βιοκτόνου δράσης
Στεγνά πανάκια: η μοριακή σύνθεση του υλικού κατασκευής μπορεί να αλλοιώσει τη δράση των απολυμαντικών, δεσμεύοντας και αδρανοποιώντας τα συστατικά τους.¹⁶

Αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα. Δοκιμασμένο σε ανεξάρτητα εργαστήρια υπό βρώμικες συνθήκες.

Οι συνθήκες δοκιμής, η μείωση του log και οι χρόνοι επαφής δίνουν μια εικόνα για την κλινική απόδοση ενός απολυμαντικού.

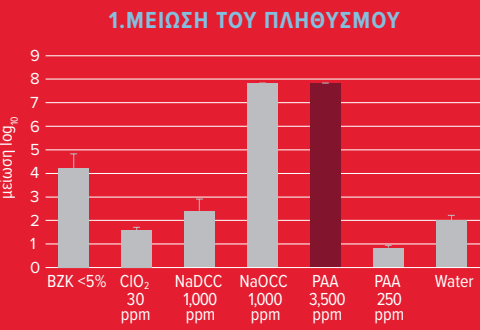
	Παραδείγματα μικροοργανισμών	Χρόνος Επαφής	EN TEST	Log
Βακτήρια	<i>Acinetobacter baumannii</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.12
	<i>Burkholderia cepacia</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.30
	<i>Enterococcus faecalis</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.30
	<i>Enterococcus hirae</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.20
		10 δευτ.	EN 16615	5.55
	<i>Escherichia coli</i> K12	10 δευτ.	EN 13727	5.10
		5 λεπτά	EN 16615	5.76
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> (CPE)	10 δευτ.	EN 13727	5.35
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	10 δευτ.	EN 13727	5.30
	<i>Legionella pneumophila</i>	1 λεπτό	EN 13727	5.38
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.06
		10 δευτ.	EN 16615	5.31
	<i>Salmonella typhimurium</i>	10 δευτ.	EN 14561	5.04
	<i>Serratia marsescens</i>	30 δευτ.	EN 13727	5.29
	<i>Staphylococcus aureus</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.23
		10 δευτ.	EN 16615	5.83
Μύκητες	Vancomycin resistant <i>Enterococcus faecium</i> (VRE)	10 δευτ.	EN 13727	5.06
	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (<i>A. niger</i>)	5 λεπτά	EN 13624	4.02
	<i>Trichophyton rubrum</i>	5 λεπτά	EN 13697	3.75
	<i>Mycobacterium abscessus</i>	2 λεπτά	EN 14348	4.31
	<i>Mycobacterium avium</i>	2 λεπτά	EN 14348	4.12
Μυκοβακτήρια	<i>Mycobacterium bovis</i>	2 λεπτά	EN 14348	6.03
	<i>Mycobacterium terrae</i>	2 λεπτά	EN 14348	6.17
Σπόροι	<i>Bacillus cereus</i>	5 λεπτά	EN 17126	4.29
		5 λεπτά	EN 17126	4.29
	<i>Bacillus subtilis</i>	5 λεπτά	EN 17126	4.00
		3 λεπτά	EN 17126	4.32
	<i>Clostridium difficile</i>	5 λεπτά	EN 17126	4.00
Ιοί	Adenovirus	1 λεπτό	EN 14476	5.00
		5 λεπτά	ASTM E1053-11	4.17
	Herpes simplex type 1	1 λεπτό	ASTM E1053-11	4.00
	MERS-CoV	1 λεπτό	EN 14476	4.10
	Norovirus	1 λεπτό	EN 14476	4.17
	Simian virus 40	1 λεπτό	EN 14476	5.50
	Poliovirus	5 λεπτά	EN 14476	4.00
	Vaccinia virus	15 δευτ.	EN 14476	5.00
Ζυμομύκητες	<i>Candida albicans</i>	1 λεπτό	EN 13624	4.09
		10 δευτ.	EN 16615	4.41
	<i>Candida auris</i> Japanese clade (OSM2 21092)	10 δευτ.	EN 13624	4.53
Κτηνιατρικού Ενδιαφέροντος	<i>Canine parvovirus</i>	2 λεπτά	EN 14675	4.67



Siani et al. American Journal of Infection Control. 2019;12(8)

“ Ο συνδυασμός υπεροξικού οξέος στα 3500 ppm με non-woven πανάκι ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματικός* στην εξάλειψη της βιομεμβράνης του **Candida Auris**. ”^{4,17}

* σε όρους μείωσης του πληθυσμού, ρυθμού επανεμφάνισης και μεταφοράς μικροβίων



Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί παγκόσμια απειλή της υγείας.¹⁸

Η μη ορθολογική χρήση αντιβιοτικών έχει οδηγήσει στη μικροβιακή αντοχή. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των λοιμώξεων πρέπει να παίζει πρωταρχικό ρόλο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες των εξάρσεων που επηρεάζουν τόσο τους ασθενείς όσο και το υγειονομικό σύστημα.

Χωρίς σωστή απολύμανση, οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν στις επιφάνειες για ώρες, ακόμη και ημέρες¹⁹, και να ενισχύσουν περαιτέρω την εξάπλωση λοιμώξεων.

Ο ανθεκτικός στη μεθικιλίνη Staphylococcus aureus, ένας πολυανθεκτικός οργανισμός, μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες για 12 ημέρες¹⁹.

Η μικροβιακή αντοχή δεν αφορά αποκλειστικά στα βακτήρια. Το Candida auris, ένας ζυμομύκητας, αποτελεί τον νέο κίνδυνο για τους ασθενείς αλλά και για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.



Σκανάρετε για περισσότερες πληροφορίες

Ενεργός Έλεγχος Λοιμώξεων με προϊόντα Clinell®.

Η σειρά προϊόντων Clinell® προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την καθημερινή απολύμανση, τον τερματικό καθαρισμό, και την αντιμετώπιση εξάρσεων.

Ο συνδυασμός Clinell® Universal Wipes και Clinell® Peracetic Acid Wipes αποτελεί τον χρυσό κανόνα στην υγιεινή.

	Universal Wipes	Peracetic Acid Wipes
Χρήση		
Καθαρισμός ρουτίνας μεταξύ ασθενών	✓	
Πρόληψη και αντιμετώπιση ενδημικών εξάρσεων	✓	✓
Αποτελεσματικότητα		
Κλινικά αποδεδειγμένα μειώνει πολυανθεκτικά μικρόβια	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των βακτηρίων	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των ιών	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των ζυμομυκήτων	✓	✓
Καταστρέφει > 99,99% των βακτηριακών σπόρων		✓
Καταστρέφει > 99,99% των μυκήτων & βιομεμβράνης		✓
Απόδοση		
Καθαρισμός	✓	✓
Απολύμανση	✓	✓
Δραστικό σε ξηρές συνθήκες	✓	✓
Χρόνος Δράσης		
Δραστικό από 10 δευτερόλεπτα	✓	✓



PERACETIC ACID WIPES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CS25	Peracetic Acid Wipes - Πακέτο	25 ΠΑΝΑΚΙΑ	6 ΠΑΚΕΤΑ
C25D	Wall Mounted Dispenser - Επιτοίχια βάση τοποθέτησης πακέτων	-	20 ΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

1. Doan L, Forrest H, Fakis A, Craig J, Claxton L., Khare M. Clinical and cost effectiveness of eight disinfection methods for terminal disinfection of hospital isolation rooms contaminated with Clostridium difficile 027. J Hosp Infect. Oct 2012;82(2):114-121.

2. Siani H, Wesgate R, Maillard JY. Impact of antimicrobial wipes compared with hypochlorite solution on environmental surface contamination in a health care setting: A double-crossover study. Am J Infect Control. Oct 2018;46(10):11801187. Sep 13-19 2011;107(36):22-25.

3. Carter Y, Barry D. Tackling C difficile with environmental cleaning. Nurs Times. Sep 13-19 2011;107(36):22-25.

4. Ledwoch K, Maillard JY. Candida auris dry surface biofilm (DSB) for disinfectant efficacy testing. Materials (Basel). 2019;12(1):4-13. doi:10.3390/ma12010018

5. Siani H, Cooper C, Maillard JY. Efficacy of "sporidicidal" wipes against Clostridium difficile. Am J Infect Control. 2011;39(3):212-218. doi:10.1016/j.ajic.2011.01.006

6. Bloss R, Meyer S, Kampf G. Adsorption of active ingredients of surface disinfectants depends on the type of fabric used for surface treatment. J Hosp Infect. May 2010;75(1):56-61.

7. Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare-associated infections. Current opinion in infectious diseases. 2013 Aug;26(4):338-44.

8. Condeell O, Versen C, Cooney S, et al. Efficacy of biocides used in the modern food industry to control Salmonella enterica, and links between biocide tolerance and resistance to clinically relevant antimicrobial compounds. Appl Environ Microbiol. 2012;78(9):3087-3097. doi:10.1128/AEM.07534-11

9. Leung CY, Chan YC, Samaranyake LP, Seneviratne CJ. Biocide resistance of Candida and Escherichia coli biofilms is associated with higher antioxidative capacities. J Hosp Infect. 2012;81(2):79-86. doi:10.1016/j.jhin.2011.09.014

10. Smith K, Hunter IS. Efficacy of common hospital biocides with biofilms of multi-drug resistant clinical isolates. J Med Microbiol. 2008;57(8):966-973. doi:10.1099/jmm.0.47668-0.

11. Ledwoch K, Dancer SJ, Otter JA, et al. Beware biofilm! Dry biofilms containing bacterial pathogens on multiple healthcare surfaces; a multi-center study. J Hosp Infect. 2018;100(3):e47-e56. doi:10.1016/j.jhin.2018.06.028

12. Saha A, Botha SL, Weaving P, Satta G. A pilot study to assess the effectiveness and cost of routine universal use of peracetic acid sporidicidal wipes in real clinical environment. Am J Infect Control. 2016;44(11):1247-1251. doi:10.1016/j.ajic.2016.03.046.

13. Hoyle GW, Svendsen ER. Persistent effects of chlorine inhalation on respiratory health. Ann N Y Acad Sci. 2016;1378(1):33-40.

14. Maillard JY, Denyer SP. Emerging bacterial resistance following biocide exposure: should we be concerned?. Chimicaoggi. 2009;27(3):26-8.

15. Humphreys PN, Finan P, Rout S, et al. A systematic evaluation of a peracetic-acid-based high performance disinfectant. J Infect Prev. 2013;14(4):126-131. doi:10.1177/1757177413476125

16. Bloß R, Meyer S, Kampf G. Adsorption of active ingredients of surface disinfectants depends on the type of fabric used for surface treatment. J Hosp Infect. 2010;75(1):56-61. doi:10.1016/j.jhin.2009.11.027

17. Ledwoch K, Magoga M, Williams D, Fabbri S, Walsh J, Maillard J-Y. Is a reduction in viability enough to determine biofilm susceptibility to a biocide? Infect Control Hosp Epidemiol - First View. 2021;1-7. doi:doi:10.1017/ice.2021.42

18. Huang R, Mehta S, Weed D, Price CS. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus survival on hospital fomites. Infect Control Hosp Epidemiol. 2006 Nov;27(11):1267-9.

19. World Health Organisation. Antibiotic resistance. Published Jul 31, 2020 Accessed Mar 8, 2022. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance#:~:text=Bacteria%2C%20not%20humans%20or%20animals,hospital%20stays%2C%20and%20increased%20mortality.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

CE 0050 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ



GAMA Healthcare Ltd. 2 Regal Way, Watford, Hertfordshire, WD24 4YJ T +44 (0)20 7993 0030 | www.gamahealthcare.com | info@gamahealthcare.com



Μαζί χτίζουμε

την ασφάλεια

της υγείας

clinell®



UNIVERSAL
WIPES



PERACETIC ACID
WIPES

Οδηγίες Καθαριότητας

Clinell® Universal Wipes

Clinell® Peracetic Acid Wipes



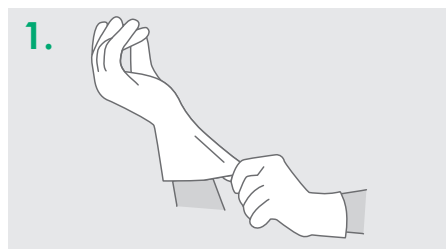
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Clinell® Universal πανάκια για απολύμανση & καθαρισμό μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών.

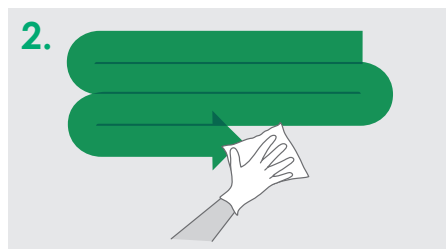
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ.

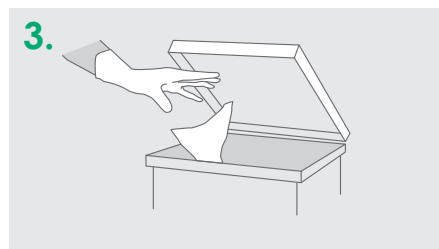
Πως να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις επιφάνειες



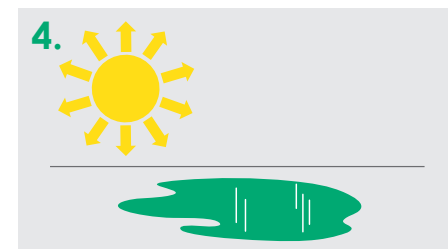
1. Αξιολογήστε την κατάσταση και φορέστε τα ενδεδειγμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Πάρτε ένα πανάκι απο τη συσκευασία. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ διαφορετικό πανάκι σε κάθε νέα επιφάνεια.



2. Καθαρίστε απο την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα **S**, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά απο τις ίδιες περιοχές.



3. Χρησιμοποιήστε καινούργιο πανάκι όταν αυτό στεγνώσει ή βρωμίσει. Πετάξτε το βρώμικο στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων.



4. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

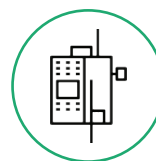
Καθημερινός καθαρισμός μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών - επιφανειών και εξοπλισμού

Τα πιστοποιημένα κατά CE Πανάκια Clinell® Universal*, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως:

Καθαρίστε πάντα μετά απο κάθε χρήση
και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου



- Μηχανήματα Υπερήχων
- Αισθητήρες Οξύμετρου
- Αντλίες Έγχυσης



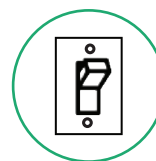
- Συσκευές Αρτηριακής Πίεσης
- Ακτινολογικός Εξοπλισμός



- Αισθητήρες Doppler
- Στηθοσκόπια
- Συσκευές ECG



- Θερμοκοιτίδες
- Μανσέτες Αρτηριακής Πίεσης
- Οθόνες



* CE0473 Πιστοποιημένα κατα CE Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIa.

Πρωτοπόρες Υπηρεσίες Συμπεριλαμβάνει καινοτόμα kit εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης εξειδικευμένους νοσοκομειακούς εκπαιδευτές, 2108049747 ή info@biokon.gr ειδικό υλικό, αφίσσες και εγκατάσταση dispenser.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

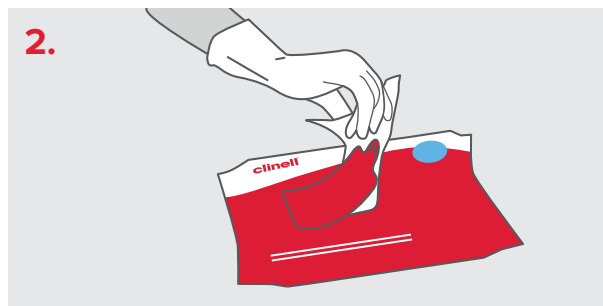
Clinell® Peracetic Acid Wipes πανάκια υπεροξικού οξέως για υψηλού βαθμού απολύμανση μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών, επιφανειών και εξοπλισμού.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ.



1. Φορέστε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).



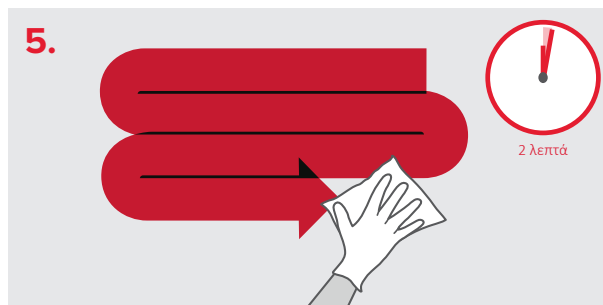
2. Αφαιρέστε ένα πανάκι από τη συσκευασία.



3. Για να το ενεργοποιήσετε, βρέξτε το πανάκι με νερό κάτω από τη βρύση ή βουτώντας το σε μια λεκάνη με νερό.



4. Στίψτε το πανάκι για να απομακρύνετε την περίσσεια νερού.



5. Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σε σχήμα "S", προσέχοντας να μην περάσει από την ίδια περιοχή 2 φορές.



6. Χρησιμοποιείτε καινούριο πανάκι όταν αυτό στεγνώσει ή βρωμίσει. Πετάξτε το βρώμικο στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με τον αέρα.

Να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ε.Π.Ε.
ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 112, 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ
Τ: 2108048747 | info@biokon.gr | www.biokon.gr

Πρωτοπόρες Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης
Συμπεριλαμβάνει καινοτόμα kit εκπαίδευσης, εξειδικευμένους νοσοκομειακούς εκπαιδευτές, ειδικό υλικό, αφίσες και εγκατάσταση επιτοίχιας θήκης τοποθέτησης.

Μαζί χτίζουμε

την ασφάλεια

της υγείας

clinell®



UNIVERSAL
WIPES



PERACETIC ACID
WIPES

Πίνακες Αποτελεσματικότητας

Clinell® Universal Wipes

Clinell® Peracetic Acid Wipes



	Παραδείγματα μικροοργανισμών	Χρόνος Επαφής	EN ΤΕΣΤ	Συνθήκες
Gram-negative bacteria	Acinetobacter baumannii	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Escherichia coli	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Klebsiella pneumoniae (CPE)	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Pseudomonas aeruginosa	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
Gram-positive bacteria	Enterococcus hirae	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Staphylococcus aureus (MRSA)	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Staphylococcus capitis	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
	Enterococcus faecium (VRE)	10 δευτ.	EN13727	Βρώμικες
Mycobacteria	Mycobacterium bovis	2 λεπτά	EN14348	Βρώμικες
Non-enveloped viruses	Norovirus	1 λεπτό	EN14476	Βρώμικες
	Rotavirus	1 λεπτό	EN14476	Βρώμικες
Enveloped viruses	HIV	30 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Hepatitis C	1 λεπτό	EN14476	Βρώμικες
	SARS-CoV-2	30 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Vaccinia virus	15 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Influenza (H5N1)	30 δευτ.	EN14476	Βρώμικες
	Influenza (H1N1, H3N2)	2 λεπτά	EN14476	Βρώμικες
Yeast	Candida albicans	10 δευτ.	EN16615	Βρώμικες
	Candida auris	10 δευτ.	EN13624	Βρώμικες

Πως να καθαρίσετε αποτελεσματικά



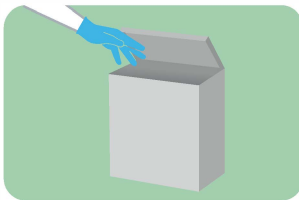
Πλύνετε ή απολυμάνετε τα χέρια σας και εφαρμόστε τα ενδεδειγμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.



Πάρτε ένα πανάκι από τη συσκευασία. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ διαφορετικό πανάκι σε κάθε νέα επιφάνεια.



Καθαρίστε από την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα S, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά από τις ίδιες περιοχές.



Χρησιμοποιήστε καινούργιο πανάκι όταν αυτό στεγνώσει ή βρωμίσει. Πετάξτε το βρώμικο στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ -ΣΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ- ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ.



	Παραδείγματα μικροοργανισμών	Χρόνος Επαφής	EN TEST	Log	Συνθήκες
Bacteria	<i>Acinetobacter baumannii</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.12	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Burkholderia cepacia</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.30	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Enterococcus faecalis</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.30	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Enterococcus hirae</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.20	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		10 δευτ.	EN 16615	5.55	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Escherichia coli</i> K12	10 δευτ.	EN 13727	5.10	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		5 λεπτά	EN 16615	5.76	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> (CPE)	10 δευτ.	EN 13727	5.35	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Klebsiella pneumoniae</i> (ESBL)	10 δευτ.	EN 13727	5.30	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Legionella pneumophila</i>	1 λεπτό	EN 13727	5.38	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.06	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		10 δευτ.	EN 16615	5.31	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Salmonella typhimurium</i>	10 δευτ.	EN 14561	5.04	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Serratia marsescens</i>	30 δευτ.	EN 13727	5.29	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Staphylococcus aureus</i>	10 δευτ.	EN 13727	5.23	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		10 δευτ.	EN 16615	5.83	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
Fungi	Vancomycin resistant <i>Enterococcus faecium</i> (VRE)	10 δευτ.	EN 13727	5.06	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Aspergillus brasiliensis</i> (A. niger)	5 λεπτά	EN 13624	4.02	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Trichophyton rubrum</i>	5 λεπτά	EN 13697	3.75	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
Mycobacteria	<i>Mycobacterium abscessus</i>	2 λεπτά	EN 14348	4.31	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Mycobacterium avium</i>	2 λεπτά	EN 14348	4.12	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Mycobacterium bovis</i>	2 λεπτά	EN 14348	6.03	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Mycobacterium terrae</i>	2 λεπτά	EN 14348	6.17	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
Spores	<i>Bacillus cereus</i>	5 λεπτά	EN 17126	4.29	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		5 λεπτά	EN 17126	4.29	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Bacillus subtilis</i>	5 λεπτά	EN 17126	4.00	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Clostridium difficile</i>	3 λεπτά	EN 17126	4.32	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		5 λεπτά	EN 17126	4.00	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
Virus	Adenovirus	1 λεπτό	EN 14476	5.00	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		5 λεπτά	ASTM E1053-11	4.17	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	Herpes simplex type 1	1 λεπτό	ASTM E1053-11	4.00	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	MERS-CoV	1 λεπτό	EN 14476	4.10	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	Norovirus	1 λεπτό	EN 14476	4.17	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	Simian virus 40	1 λεπτό	EN 14476	5.50	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	Poliovirus	5 λεπτά	EN 14476	4.00	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
Yeast Organism	<i>Vaccinia virus</i>	15 δευτ.	EN 14476	5.00	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Candida albicans</i>	1 λεπτό	EN 13624	4.09	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
		10 δευτ.	EN 16615	4.41	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
Veterinary Organism	<i>Candida auris</i> Japanese clade (OSMZ 21092)	10 δευτ.	EN 13624	4.53	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα
	<i>Canine parvovirus</i>	2 λεπτά	EN 14675	4.67	Βρώμικες + Ερυθροκύτταρα

