

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MicroClave®

Neutral Displacement Connectors

Needlefree technology that is designed to reduce the risk of bacterial contamination and improve patient outcomes.

Το **MicroClave** είναι μια ειδική κλειστή συσκευή σύνδεσης σε καθετήρα ουδέτερης παλινδρόμησης χωρίς τη χρήση βελόνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους περιφερικών, αρτηριακών και φλεβικών κεντρικών καθετήρων για τη χορήγηση IV υγρών, αγωγών και προϊόντων αίματος.

Έχει κλινικά αποδεδειγμένα σχεδιαστική τεχνολογία που μειώνει τον κίνδυνο βακτηριακής λοίμωξης και βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσματα.



ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ

Πριν τοποθετήσετε το MicroClave, **απολυμαίνετε το άκρο του καθετήρα***. Με άσηπτη τεχνική αφαιρέστε το MicroClave από τη συσκευασία του & ξεαερώστε το. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα και βιδώστε το αρσενικό luer του MicroClave στην είσοδο του IV καθετήρα /ή στην προέκταση.

Πριν από κάθε σύνδεση **απολυμαίνετε το σιλικονούχο άκρο του MicroClave** τρίβοντας με γάζα εμποτισμένη σε αντισηπτικό* .

* (π.χ. Χλωρεξιδίνη 2% ή/ & Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%. Ο χρόνος δράσης των απολυμαντικών ποικίλει, ακολουθήστε το πρωτόκολλο του νοσοκομείου).



ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Κρατήστε το MicroClave σταθερά, βιδώστε τη συσκευή χορήγησης στην έξοδο του MicroClave και ξεκινήστε τη χορήγηση /ή για να συνδέσετε απλή σύριγγα προσαρμόστε, σπρώξτε και στρίψτε κατά ¼ του κύκλου την εξεαρωμένη σύριγγα. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή srip lock/βιδωτή, πρώτα σπρώξτε και στρίψτε το luer στο MicroClave μέχρι να σφίξει και στη συνέχεια ασφαλίστε το δακτύλιο.

Για να αποσυνδέσετε, πιάστε σταθερά το MicroClave (όχι τον αυλό του καθετήρα) και ξεβιδώστε τη συσκευή χορήγησης μέχρι να απελευθερωθεί /ή στρίψτε τη σύριγγα (προς την ίδια φορά που συνδέσατε).



ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση ξεπλύνετε (flush) το MicroClave με φυσιολογικό ορό ή σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας. Κάντε συχνά flush σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας για τη διατήρηση της βατότητας του καθετήρα.

Αλλάξτε το MicroClave σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας.

Προσοχή


- Πάντα απολυμαίνετε πριν τη χρήση
- Μην τοποθετείτε πώμα στο MicroClave
- Μην χρησιμοποιείτε βελόνα



Η επιλογή του flush με φυσιολογικό ορό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Όγκος Πλήρωσης:	0,04 ml
Ρυθμός Ροής:	165 ml/min
Ενεργοποιήσεις:	600
Συμβατό με αίμα:	✓
Συμβατό με MRI, CT:	✓
Συμβατό με Υψηλή Πίεση:	10 ml/sec

Συμβατό με:	
Αλκοόλ:	✓
Λιπίδια:	✓
Χλωρεξιδίνη:	✓
Χημειοθεραπεία:	✓
Δεν περιέχει Latex, Phthalate's (DEHP) ή Μεταλλικά μέρη	

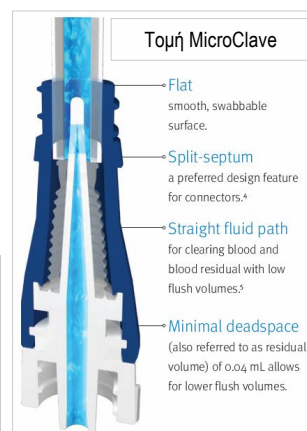

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MicroClave®

Neutral Displacement Connectors

Needlefree technology that is designed to reduce the risk of bacterial contamination and improve patient outcomes.

Το **MicroClave** είναι μια ειδική κλειστή συσκευή σύνδεσης σε καθετήρα ουδέτερης παλινδρόμησης χωρίς τη χρήση βελόνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους περιφερικών, αρτηριακών και φλεβικών κεντρικών καθετήρων για τη χορήγηση IV υγρών, αγωγών και προϊόντων αίματος.

Έχει κλινικά αποδεδειγμένα σχεδιαστική τεχνολογία που μειώνει τον κίνδυνο βακτηριακής λοίμωξης και βελτιώνει τα κλινικά αποτελέσματα.



ΑΠΟΛΥΜΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ

Πριν τοποθετήσετε το MicroClave, **απολυμαίνετε το άκρο του καθετήρα***. Με άσηπτη τεχνική αφαιρέστε το MicroClave από τη συσκευασία του & ξεαερώστε το. Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα και βιδώστε το αρσενικό luer του MicroClave στην είσοδο του IV καθετήρα /ή στην προέκταση.

Πριν από κάθε σύνδεση **απολυμαίνετε το σιλικονούχο άκρο του MicroClave** τρίβοντας με γάζα εμποτισμένη σε αντισηπτικό* .

* (π.χ. Χλωρεξιδίνη 2% ή/ & Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%. Ο χρόνος δράσης των απολυμαντικών ποικίλει, ακολουθήστε το πρωτόκολλο του νοσοκομείου).



ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Κρατήστε το MicroClave σταθερά, βιδώστε τη συσκευή χορήγησης στην έξοδο του MicroClave και ξεκινήστε τη χορήγηση /ή για να συνδέσετε απλή σύριγγα προσαρμόστε, σπρώξτε και στρίψτε κατά ¼ του κύκλου την εξεαρωμένη σύριγγα. Αν χρησιμοποιείτε συσκευή srip lock/βιδωτή, πρώτα σπρώξτε και στρίψτε το luer στο MicroClave μέχρι να σφίξει και στη συνέχεια ασφαλίστε το δακτύλιο.

Για να αποσυνδέσετε, πιάστε σταθερά το MicroClave (όχι τον αυλό του καθετήρα) και ξεβιδώστε τη συσκευή χορήγησης μέχρι να απελευθερωθεί /ή στρίψτε τη σύριγγα (προς την ίδια φορά που συνδέσατε).



ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση ξεπλύνετε (flush) το MicroClave με φυσιολογικό ορό ή σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας. Κάντε συχνά flush σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας για τη διατήρηση της βατότητας του καθετήρα.

Αλλάξτε το MicroClave σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας.

Προσοχή

- Πάντα απολυμαίνετε πριν τη χρήση
- Μην τοποθετείτε πώμα στο MicroClave
- Μην χρησιμοποιείτε βελόνα



Η επιλογή του flush με φυσιολογικό ορό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Όγκος Πλήρωσης:	0,04 ml
Ρυθμός Ροής:	165 ml/min
Ενεργοποιήσεις:	600
Συμβατό με αίμα:	✓
Συμβατό με MRI, CT:	✓
Συμβατό με Υψηλή Πίεση:	10 ml/sec

Συμβατό με:	
Αλκοόλ:	✓
Λιπίδια:	✓
Χλωρεξιδίνη:	✓
Χημειοθεραπεία:	✓
Δεν περιέχει Latex, Phthalate's (DEHP) ή Μεταλλικά μέρη	

